

Инструкции за употреба

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Списък с продукти и наименования

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Реф. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Реф. 4801

Предназначение

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate е продукт за първа помощ за промиване на рани и очи при инциденти с киселини и алкали.


Инструкции за употреба – пиктограми – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

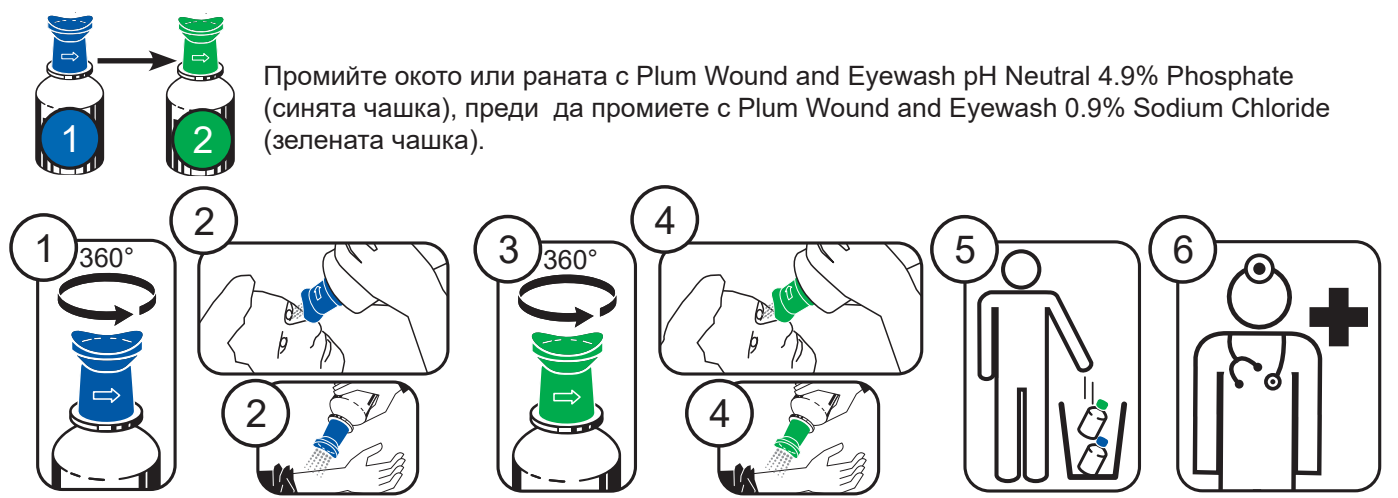

Промийте окото или раната с Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (синята чашка), преди да промиете с Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (зелената чашка).

- Отвъртете капачката.
- Промийте окото или раната с Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Изпразнете бутилката.
- Отвъртете капачката.
- Продължете изплакването с Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Изпразнете бутилката.
- Изхвърлете празните бутилки.
- Потърсете медицинска помощ.

Инструкции за употреба – пиктограми – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

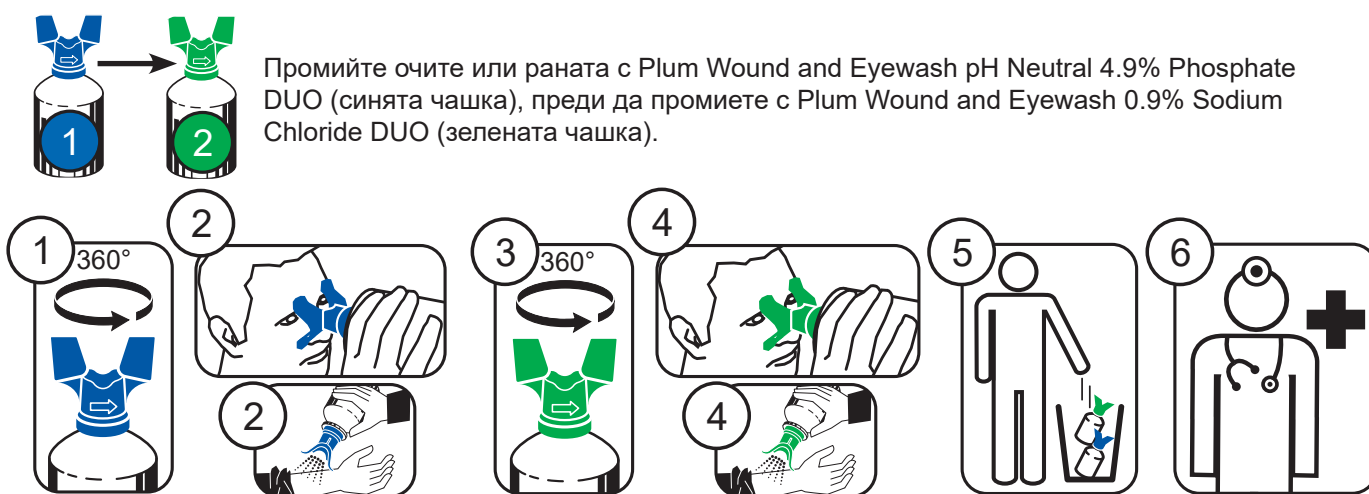

Промийте очите или раната с Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (синята чашка), преди да промиете с Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (зелената чашка).

- Отвъртете капачката.
- Промийте очите или раната с Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Изпразнете бутилката.
- Отвъртете капачката.
- Продължете изплакването с Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Изпразнете бутилката.
- Изхвърлете празните бутилки от DUO.
- Потърсете медицинска помощ.

Предупреждения



Не използвайте този продукт за инциденти с пръски, съдържащи флуороводородна киселина.

HF



Не използвайте този продукт за инциденти с пръски, съдържащи калций.


Ca



NaClO

Не използвайте този продукт за инциденти с пръски, съдържащи натриев хипохлорит (избелващи вещества).

Обяснение на символите

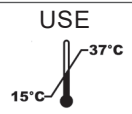	Можете да откриете допълнителна информация в брошурата на гърба на етикета		Обелете/отворете външния слой на етикета, за да прочетете брошурата с допълнителна информация
	Обозначава производителя на медицинското изделие и е показан заедно с името и адреса на производителя		Указва как трябва да е обърната бутилката
	Маркировка „CE“ с номер на нотифициран орган		Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Единична стерилна бариерна система		Да не се използва повторно. Медицинското изделие е предназначено само за еднократна употреба.
	Медицинско изделие		Дава информация за партидния код на производителя за идентифициране на партидата.
	Температурна граница за употреба		Срок на годност. Указва датата, след която медицинското изделие не трябва да се използва.
	Температурна граница за съхранение		Дата на производство
	Предупреждение. Веществата, съдържащи калций, като например калциев хидроксид, цимент и вар, могат да повишат риска от нежелани ефекти при настъпване на увреждане на роговицата, което може да доведе до калцификация на роговицата.		Предупреждение. NaClO се среща в почистващи препарати (белини). Въпреки че дразнещото въздействие на алкалите ще бъде намалено чрез използването на буфер, дразнещото въздействие на хлора ще се повиши. Следователно не е препоръчително да използвате продукта в случаи на такива пръски.
	Предупреждение. Флуороводородната киселина е токсична и силно разяждаща за очите, кожата и костите. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate не е предназначено като първа помощ за инциденти с очите, включващи флуороводородна киселина, защото не ограничава разяждащото въздействие на HF.		

Странични ефекти/неправилно функциониране

Продуктите са създадени като продукти за първа помощ за промиване на очи. Ако изпитате странични ефекти или неправилно функциониране, моля, съобщете на Plum Safety ApS, info@plum.eu или се обадете на +45 6916 9600, за да се задействат необходимите коригиращи мерки. Сериозни странични ефекти винаги трябва да се съобщават на съответните компетентни органи.

Контакти

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Емейл адрес: Info@plum.eu • Уебсайт: plum.eu