

Anvendelsesinstruktioner

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

Produktliste og navne


Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Tilsigtet anvendelse

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er et førstehjælpsprodukt til udskylning af sår og øjne i forbindelse med ulykker med syrer og baser.

Anvendelsesinstruktioner - piktogrammer -

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

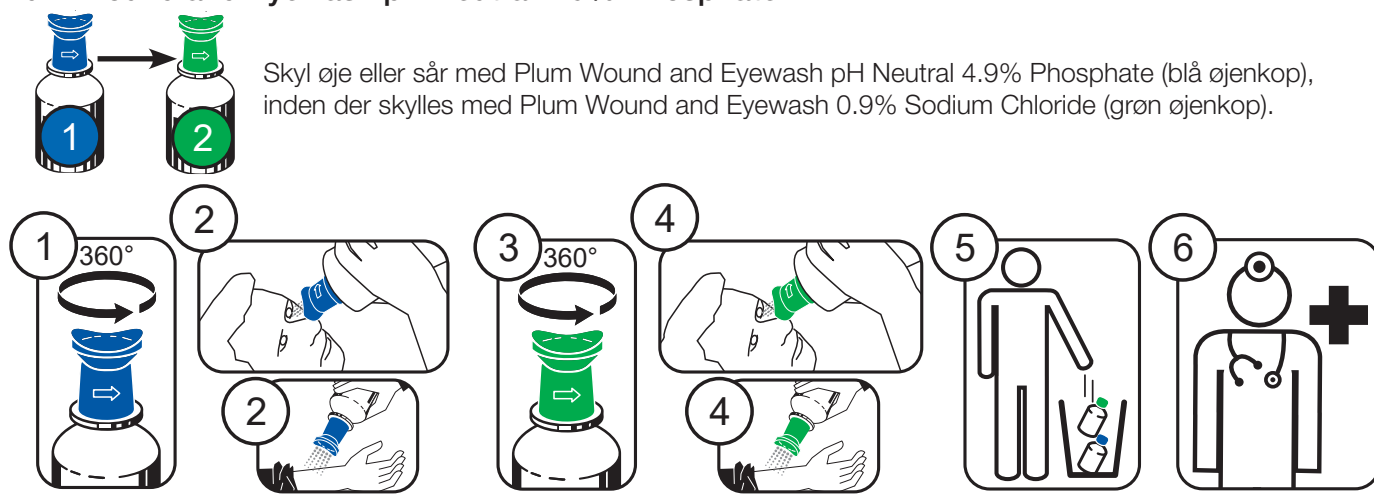

Skyl øje eller sår med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (blå øjenkop), inden der skylles med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (grøn øjenkop).

- 1 360°
Skrue hættten af.
- 2
Skyl øje eller sår med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Tøm flasken.
- 3 360°
Skrue hættten af.
- 4
Fortsæt med at skylle med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Tøm flasken.
- 5
Smid de tomme flasker væk.
- 6
Søg lægehjælp.

Anvendelsesinstruktioner - piktogrammer -

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO



Skyl øjne eller sår med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (blå øjenkop), inden der skylles med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (grøn øjenkop).

- 1 360°
Skrue hættten af.
- 2
Skyl øjne eller sår med Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Tøm flasken.
- 3 360°
Skrue hættten af.
- 4
Fortsæt med at skylle med Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Tøm flasken.
- 5
Smid de tomme DUO-flasker væk.
- 6
Søg lægehjælp.

Advarsler



Brug ikke dette produkt ved ulykker med sprøjt af flussyre.



Brug ikke dette produkt ved ulykker med sprøjt af natriumhypoklorit.



Brug ikke dette produkt ved ulykker med sprøjt af kalcium.

Symbolforklaring

	Læs mere i den medfølgende booklet-etikette.		Fjern etikettens yderste lag for at læse mere om produktet i den medfølgende booklet-etikette.
	Angiver producenten af det medicinske udstyr og vises sammen med producentens navn og adresse		Viser hvordan flasken skal vendes
	CE-mærkning med identifikationsnummeret på det bemyndigede organ		Må ikke anvendes, hvis pakken er beskadiget
	Enkelt sterilt barriersystem		Må ikke genanvendes. Dette medicinske udstyr er kun beregnet til engangsbrug
	Medicinsk udstyr		Informerer om producentens batchkode med henblik på identificering af batch / lot
	Temperaturgrænse for anvendelse		Seneste anvendelsesdato. Indikerer den senest tilladte anvendelsesdato for det medicinske udstyr
	Temperaturgrænse for opbevaring		Produktionsdato
	Advarsel. Substanser indeholdende kalcium såsom: kalciumhydroxid, cement og kalk kan øge risikoen for utilsigtede reaktioner ved hornhindeskader, hvilket kan medføre hornhindeforkalkning		Advarsel. NaClO findes også i rengøringsmidler (blegemidler). Irritationseffekten fra baser begrænses ganske vist gennem brugen af en buffer, til gengæld vil irritationseffekten fra klorin blive øget. Det anbefales derfor ikke at bruge produktet ved sprøjt fra disse kemiske forbindelser
	Advarsel. Flussyre er giftigt og forårsager ætsning af øjne, hud og knogler. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er ikke tiltænkt førstehjælp ved øjenulykker med flussyre, fordi produktet ikke forhindrer flussyrens ætsende virkning		

Bivirkninger / fejlfunktion

Produkterne er tiltænkt øjenskyllning i forbindelse med førstehjælp. Hvis der opstår bivirkninger eller fejlfunktion, bedes du indberette dette til Plum Safety ApS via info@plum.eu eller telefonisk på +45 6916 9600, så vi kan påbegynde de nødvendige korrigerende foranstaltninger. Alvorlige bivirkninger skal altid indberettes den relevante tilsynsførende myndighed.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu