

Gebruiksaanweisung

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Produktliste und -namen

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Zweckbestimmung

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate ist ein Erste-Hilfe-Produkt zur Wund- und Augenspülung bei Unfällen mit Säuren und Laugen.


Gebruiksaanweisung – Piktogramme – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

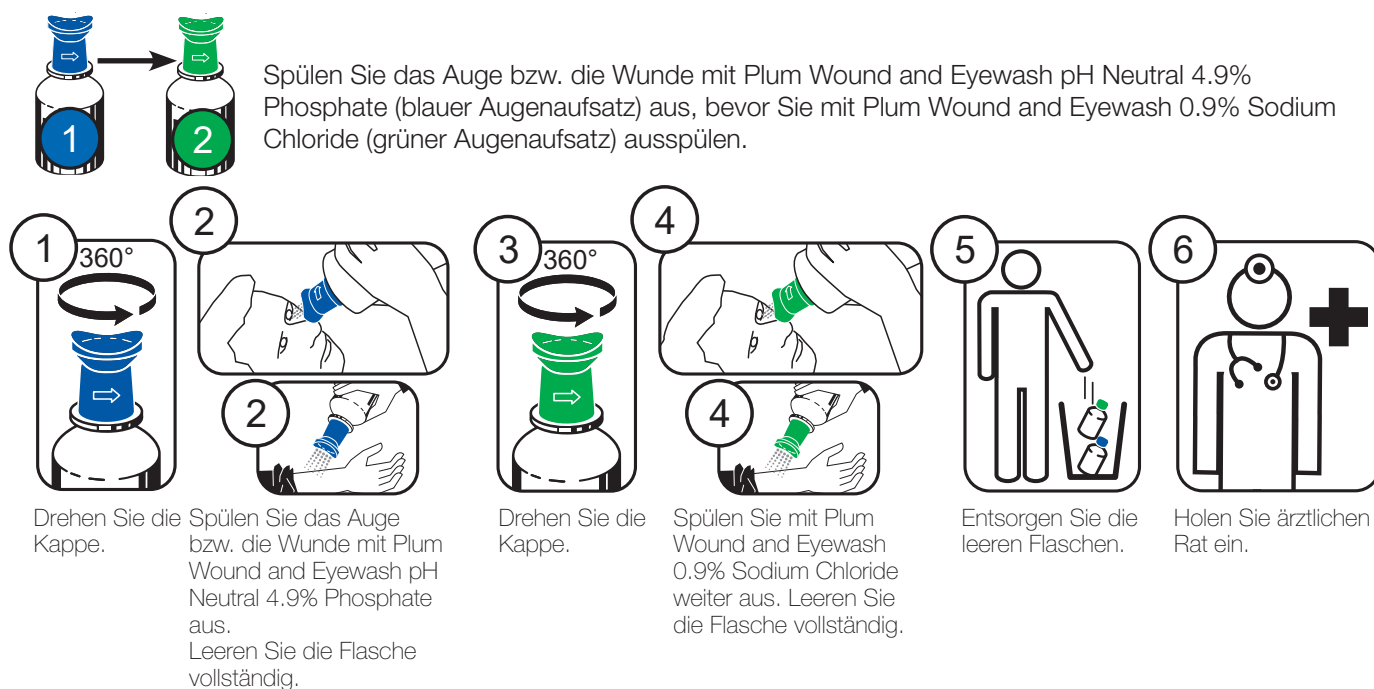

Spülen Sie das Auge bzw. die Wunde mit Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (blauer Augenaufsatz) aus, bevor Sie mit Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (grüner Augenaufsatz) ausspülen.

- Drehen Sie die Kappe. (360°)
- Spülen Sie das Auge bzw. die Wunde mit Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate aus. Leeren Sie die Flasche vollständig.
- Drehen Sie die Kappe. (360°)
- Spülen Sie mit Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride weiter aus. Leeren Sie die Flasche vollständig.
- Entsorgen Sie die leeren Flaschen.
- Holen Sie ärztlichen Rat ein.

Gebruiksaanweisung – Piktogramme – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

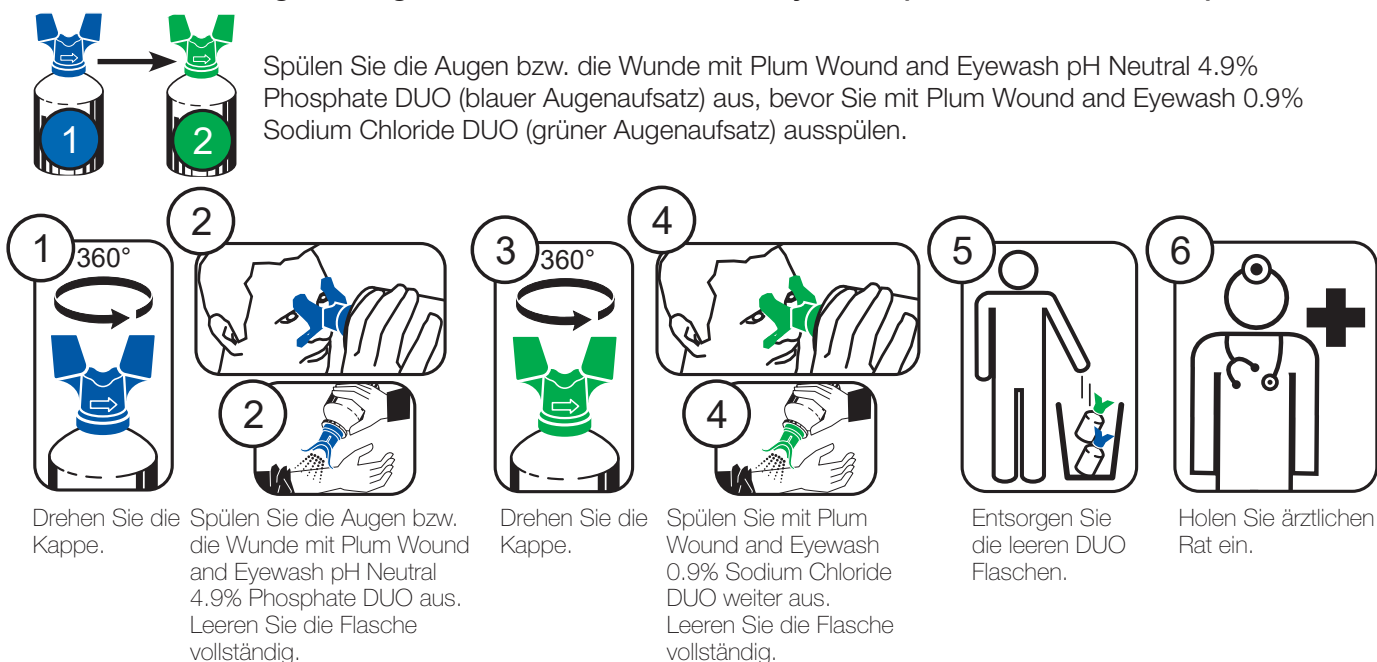

Spülen Sie die Augen bzw. die Wunde mit Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (blauer Augenaufsatz) aus, bevor Sie mit Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (grüner Augenaufsatz) ausspülen.

- Drehen Sie die Kappe. (360°)
- Spülen Sie die Augen bzw. die Wunde mit Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO aus. Leeren Sie die Flasche vollständig.
- Drehen Sie die Kappe. (360°)
- Spülen Sie mit Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO weiter aus. Leeren Sie die Flasche vollständig.
- Entsorgen Sie die leeren DUO Flaschen.
- Holen Sie ärztlichen Rat ein.

Warnhinweise



Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Vorfälle mit flusssäurehaltigen Spritzern.



Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Vorfälle mit natriumhypochlorithaltigen (bleichsubstanzhaltigen) Spritzern.



Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Vorfälle mit kalziumhaltigen Spritzern.

Symbolerklärung

	Weitere Informationen finden Sie in einer Broschüre auf der Rückseite des Etiketts		Ziehen Sie die äußere Schicht des Etiketts ab / öffnen Sie sie, um die Broschüre mit weiteren Informationen zu lesen
	Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes an und erscheint zusammen mit dem Namen und der Anschrift des Herstellers		Weist darauf hin, wie die Flasche gedreht werden muss
	CE-Kennzeichnung mit Nummer der benannten Stelle		Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Einfaches Sterilbarriersystem		Nicht wiederverwenden. Das Medizinprodukt ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt
	Medizinprodukt		Informiert über den Chargencode des Herstellers, so dass die Charge oder das Los identifiziert werden kann
	Temperaturbegrenzung für die Verwendung		Verbrauchsdatum. Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf
	Temperaturbegrenzung für die Lagerung		Herstellungsdatum
	Warnhinweis. Kalziumhaltige Substanzen wie Löschkalk, Zement und Kalk können das Risiko ernsthafter Nebenwirkungen erhöhen, wenn eine Hornhautverletzung vorliegt, was zu einer Hornhautverkalkung führen kann		Warnhinweis. NaClO kommt in Reinigungsmitteln (Bleichmitteln) vor. Die Reizwirkung von Alkali wird durch die Verwendung einer Pufferlösung zwar verringert, doch die Reizwirkung von Chlor wird verstärkt. Deshalb wird das Produkt im Fall von Spritzern dieser Art nicht empfohlen
	Warnhinweis. Flusssäure ist giftig und hat extrem ätzende Wirkung auf Augen, Haut und Knochen. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate ist nicht als Erste-Hilfe-Mittel für Vorfälle mit Flusssäure vorgesehen, da das Produkt die ätzende Wirkung von HF nicht einschränkt		

Nebenwirkungen / Fehlfunktion

Die Produkte sind als Erste-Hilfe-Mittel zur Augenspülung vorgesehen. Falls Nebenwirkungen oder Fehlfunktionen auftreten, melden Sie diese bitte Plum Safety ApS, info@plum.eu oder Telefon +45 6916 9600, damit die erforderlichen Abhilfemaßnahmen eingeleitet werden können. Ernsthafte Nebenwirkungen sollten der jeweils zuständigen Behörde gemeldet werden.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-Mail: Info@plum.eu • Internet: plum.eu