

Οδηγίες χρήσης

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Λίστα και ονομασίες προϊόντων

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Κωδ. αναφ.4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Κωδ. αναφ. 4801

Προβλεπόμενη χρήση

Το Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate είναι ένα προϊόν πρώτων βοηθειών για την έκπλυση τραυμάτων και ματιών που αφορούν ατυχήματα με οξέα και αλκάλια.


Οδηγίες χρήσης - εικονογράμματα - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

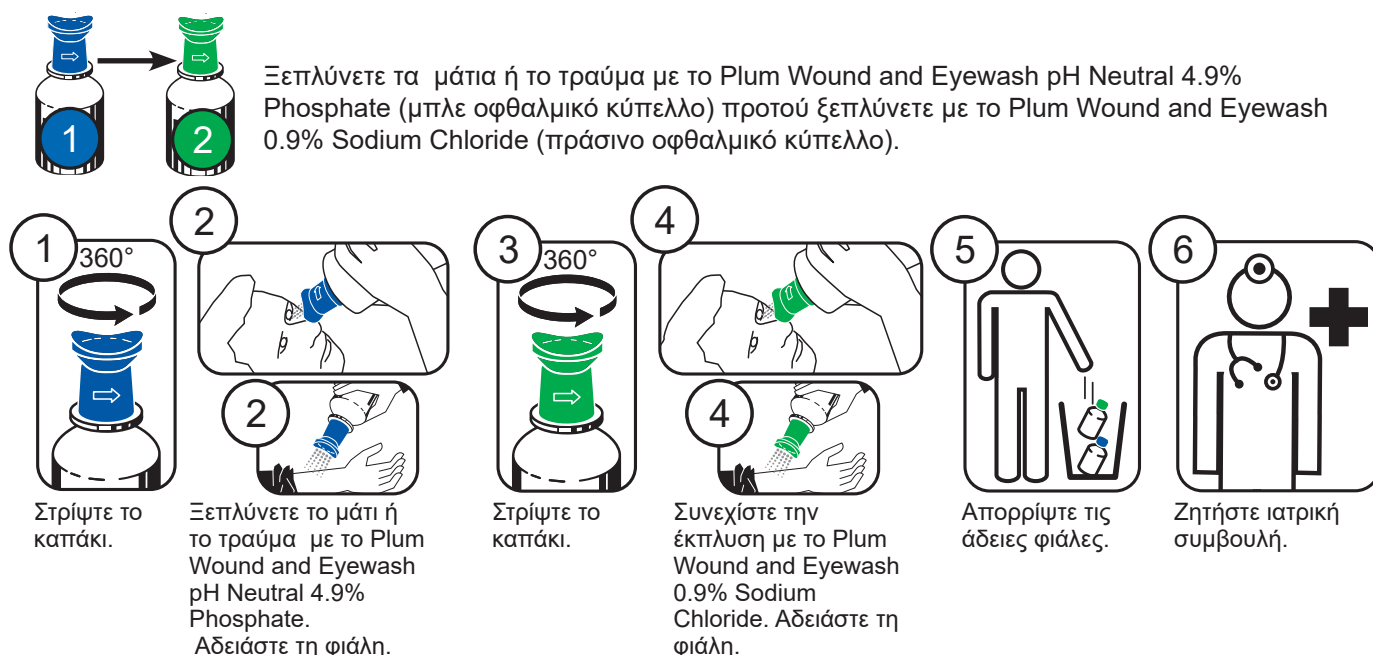

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το τραύμα με το Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (μπλε οφθαλμικό κύπελλο) προτού ξεπλύνετε με το Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (πράσινο οφθαλμικό κύπελλο).

- Στρίψτε το καπάκι.
- Ξεπλύνετε το μάτι ή το τραύμα με το Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Αδειάστε τη φιάλη.
- Στρίψτε το καπάκι.
- Συνεχίστε την έκπλυση με το Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Αδειάστε τη φιάλη.
- Απορρίψτε τις άδειες φιάλες.
- Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Οδηγίες χρήσης - εικονογράμματα - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

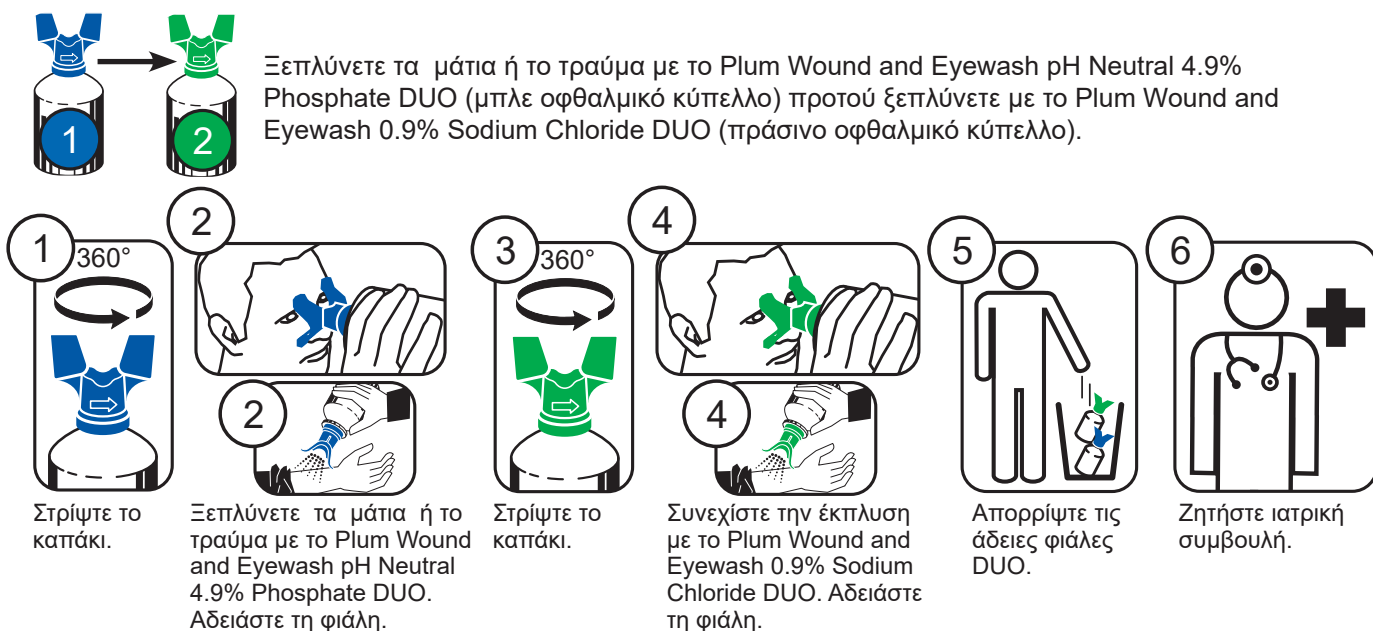

Ξεπλύνετε τα μάτια ή το τραύμα με το Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (μπλε οφθαλμικό κύπελλο) προτού ξεπλύνετε με το Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (πράσινο οφθαλμικό κύπελλο).

- Στρίψτε το καπάκι.
- Ξεπλύνετε τα μάτια ή το τραύμα με το Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Αδειάστε τη φιάλη.
- Στρίψτε το καπάκι.
- Συνεχίστε την έκπλυση με το Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Αδειάστε τη φιάλη.
- Απορρίψτε τις άδειες φιάλες DUO.
- Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Προειδοποιήσεις



HF

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περιστατικά με πιτσιλιές που περιέχουν υδροφθορικό οξύ.



Ca

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περιστατικά με πιτσιλιές που περιέχουν ασβέστιο.



NaClO

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για περιστατικά με πιτσιλιές που περιέχουν υποχλωριώδες νάτριο (λευκαντικά υποκατάστατα).

Επεξήγηση των συμβόλων

	Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο φυλλάδιο στο πίσω μέρος της ετικέτας		Αφαιρέστε / ανοίξτε την εξωτερική στρώση της ετικέτας και διαβάστε το φυλλάδιο με τις περισσότερες πληροφορίες
	Υποδεικνύει τον κατασκευαστή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και εμφανίζεται μαζί με το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή		Δείχνει τον τρόπο στρέψης της φιάλης
	Σήμανση CE με αριθμό κοινοποιημένου οργανισμού		Να μην χρησιμοποιείται εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά
	Σύστημα ενιαίου αποστειρωμένου φραγμού		Να μην επαναχρησιμοποιείται. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται για μία μόνο χρήση
	Ιατροτεχνολογικό προϊόν		Παρέχει τον κωδικό παρτίδας του κατασκευαστή, για την ταυτοποίηση της παρτίδας.
	Όριο θερμοκρασίας χρήσης		Ημερομηνία λήξης χρήσης. Υποδεικνύει την ημερομηνία μετά την οποία το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.
	Όριο θερμοκρασίας αποθήκευσης		Ημερομηνία παραγωγής
	Ca		NaClO
Προειδοποίηση. Ουσίες που περιέχουν ασβέστιο, όπως: υδροξείδιο του ασβεστίου, τσιμέντο και ασβέστης, μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών σε περίπτωση βλάβης του κερατοειδούς, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αβεστοποίηση του κερατοειδούς.		Προειδοποίηση. Το υποχλωριώδες νάτριο (NaClO) μπορεί να βρεθεί σε καθαριστικά μέσα (λευκαντικά). Αν και η ερεθιστική επίδραση των αλκαλίων θα μειωθεί με τη χρήση ρυθμιστικού διαλύματος, η ερεθιστική επίδραση του χλωρίου θα αυξηθεί. Ως εκ τούτου, δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε περίπτωση τέτοιων πιτσιλίσματος.	
	HF	Προειδοποίηση. Το υδροφθορικό οξύ είναι τοξικό και ιδιαίτερα διαβρωτικό για τα μάτια, το δέρμα και τα οστά. Το Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate δεν προορίζεται ως πρώτη βοήθεια για ατυχήματα στα μάτια με υδροφθορικό οξύ (HF), επειδή δεν περιορίζει τη διαβρωτική δράση του υδροφθορικού οξέος.	

Παρενέργειες / δυσλειτουργία

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί ως προϊόν πρώτων βοηθειών για την άρδευση των ματιών. Εάν παρουσιαστούν παρενέργειες ή δυσλειτουργίες, παρακαλούμε να τις αναφέρετε στην Plum Safety ApS, info@plum.eu ή στο τηλέφωνο +45 6916 9600, ώστε να δρομολογηθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει πάντα να αναφέρονται στη σχετική αρμόδια αρχή.

Επικοινωνία

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu