

# Instrucciones de uso

## Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


### Lista de productos y denominaciones

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml     | Ref. 4752 |
| Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml | Ref. 4801 |

### Finalidad prevista

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate es un producto de primeros auxilios para la irrigación de heridas y ojos en caso de accidentes con ácidos y álcalis.


### Instrucciones de uso - pictogramas - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

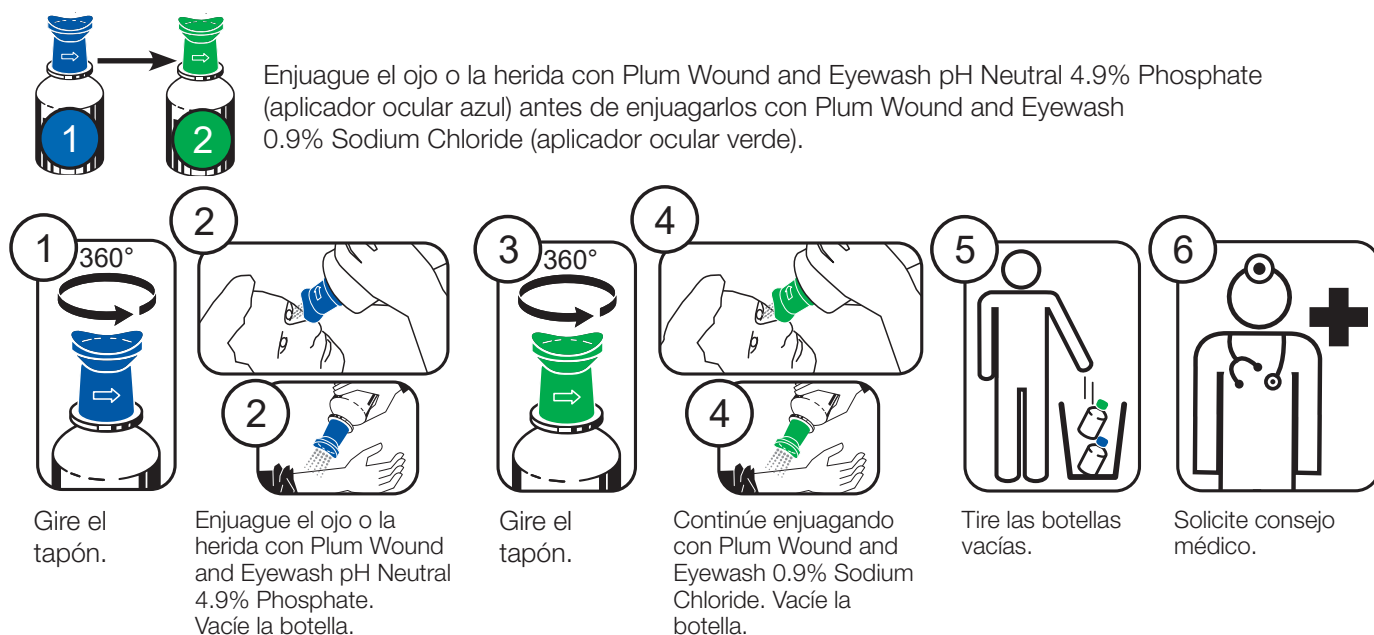

Enjuague el ojo o la herida con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (aplicador ocular azul) antes de enjuagarlos con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (aplicador ocular verde).

- 1 360°  
Gire el tapón.
- 2  
Enjuague el ojo o la herida con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Vacíe la botella.
- 3 360°  
Gire el tapón.
- 4  
Continúe enjuagando con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Vacíe la botella.
- 5  
Tire las botellas vacías.
- 6  
Solicite consejo médico.

### Instrucciones de uso - pictogramas - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

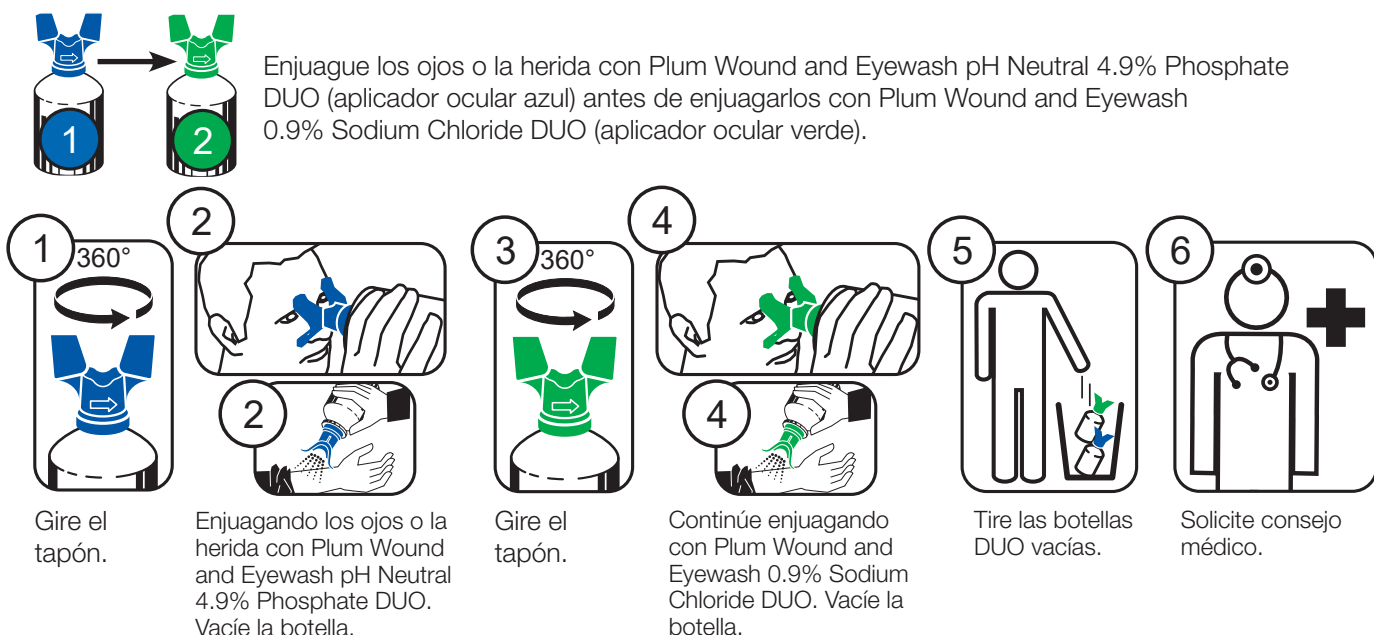

Enjuague los ojos o la herida con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (aplicador ocular azul) antes de enjuagarlos con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (aplicador ocular verde).

- 1 360°  
Gire el tapón.
- 2  
Enjuagando los ojos o la herida con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Vacíe la botella.
- 3 360°  
Gire el tapón.
- 4  
Continúe enjuagando con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Vacíe la botella.
- 5  
Tire las botellas DUO vacías.
- 6  
Solicite consejo médico.

## Advertencias



No utilice este producto en incidentes que incluyan posibles salpicaduras que contengan ácido fluorhídrico.





No utilice este producto en incidentes que incluyan posibles salpicaduras que contengan hipoclorito sódico (sustancias blanqueantes).



No utilice este producto en incidentes que incluyan posibles salpicaduras que contengan calcio.

## Aclaración de los símbolos
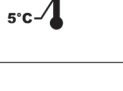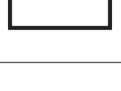
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Puede encontrar más información en el folleto ubicado tras la etiqueta                                                                                                                                                                                                                     |    | Despegue / abra la capa exterior de la etiqueta para leer el folleto con más información                                                                                                                                                                                                       |
|    | Indica el fabricante del producto sanitario y se muestra junto con el nombre y la dirección del fabricante                                                                                                                                                                                 |    | Explica cómo se debe girar la botella                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Marca CE con el número del organismo notificado                                                                                                                                                                                                                                            |    | No utilizar si el envase está dañado                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Sistema de barrera estéril único                                                                                                                                                                                                                                                           |    | No reutilizar. El producto sanitario está pensado para un solo uso                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Producto sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Informa del código de partida del fabricante que permite identificar la partida / el lote                                                                                                                                                                                                      |
|  | Límite de temperatura para la utilización                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Fecha de caducidad. Indica la fecha tras la cual no se debe utilizar el producto sanitario                                                                                                                                                                                                     |
|  | Límite de temperatura para el almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                               |  | Fecha de producción                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Advertencia.<br>Las sustancias que contienen calcio, como p. ej. el hidróxido de calcio, el cemento o la cal, pueden aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos en caso de producirse lesión en la córnea, pudiendo derivar en calcificación corneal                                    |  | Advertencia.<br>El NaClO pueden encontrarse en productos de limpieza (lejías). Aunque el efecto irritante de los álcalis se reduce con la utilización del tampón, a la vez se incrementa el efecto irritante del cloro. Por ello no se recomienda utilizar el producto ante tales salpicaduras |
|  | Advertencia.<br>El ácido fluorhídrico es tóxico y altamente corrosivo para los ojos, la piel y los huesos. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate no está pensado como primeros auxilios para accidentes oculares con ácido fluorhídrico, puesto que no limita el efecto corrosivo del HF. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Efectos secundarios / funcionamiento defectuoso

Los productos se han diseñado como productos de primeros auxilios para la irrigación ocular. En caso de experimentar efectos secundarios o un funcionamiento defectuoso, por favor, informe a Plum Safety ApS a través del correo electrónico [info@plum.eu](mailto:info@plum.eu) o el número de teléfono +45 6916 9600, con el fin de poner en marcha las medidas correctivas necesarias. Cualquier efecto adverso grave debe comunicarse a la autoridad competente pertinente en cada caso.

## Contacto

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 •  
Correo electrónico: : [Info@plum.eu](mailto:Info@plum.eu) • Página web: [plum.eu](http://plum.eu)