

Käyttöohje

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Tuoteluettelo ja tuotteiden nimet

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Viite 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Viite 4801

Käyttötarkoitus

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate on ensiaputuote haavojen ja silmien huuhteluun tapaturmatilanteissa, joihin liittyy happoja ja emäksiä.


Käyttöohje – kuvamerkit – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

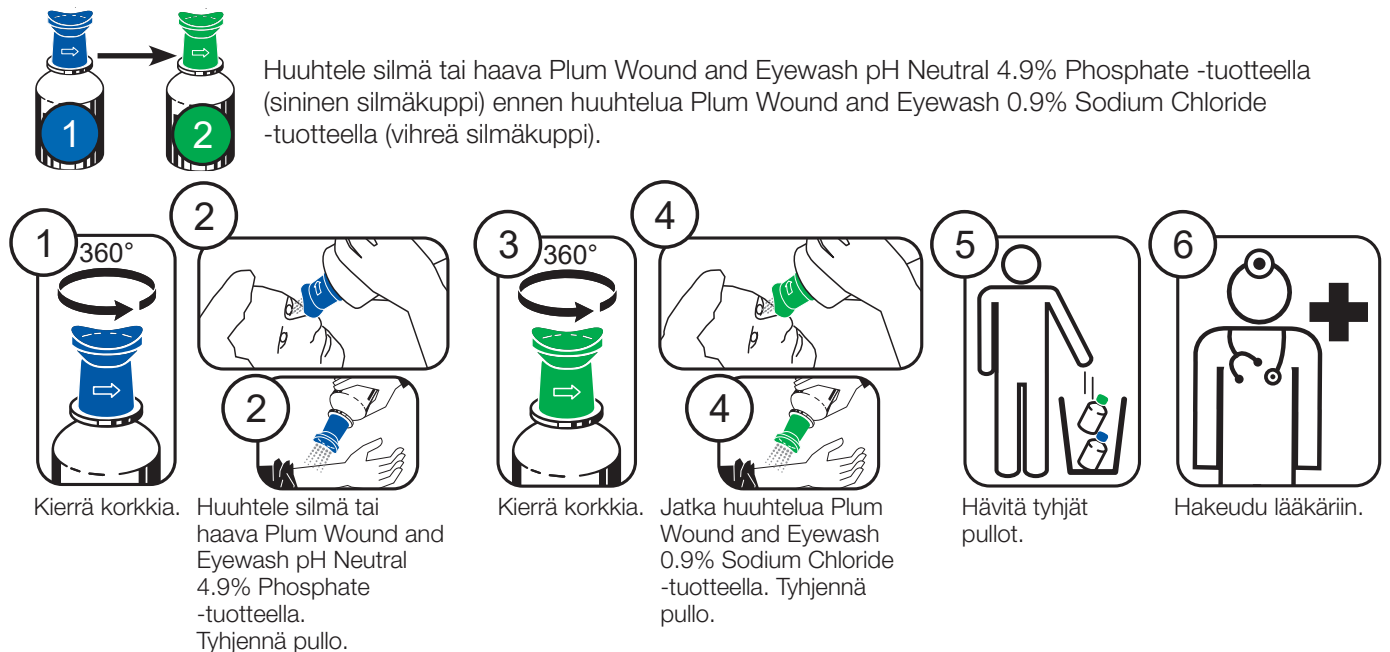

Huuhtelee silmä tai haava Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate -tuotteella (sininen silmäkuppi) ennen huuhtelua Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride -tuotteella (vihreä silmäkuppi).

- 1 360° Kierrä korkkia.
- 2 Huuhtelee silmä tai haava Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate -tuotteella. Tyhjennä pullo.
- 3 360° Kierrä korkkia.
- 4 Jatka huuhtelua Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride -tuotteella. Tyhjennä pullo.
- 5 Hävitä tyhjät pullot.
- 6 Hakeudu lääkäriin.

Käyttöohje – kuvamerkit – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

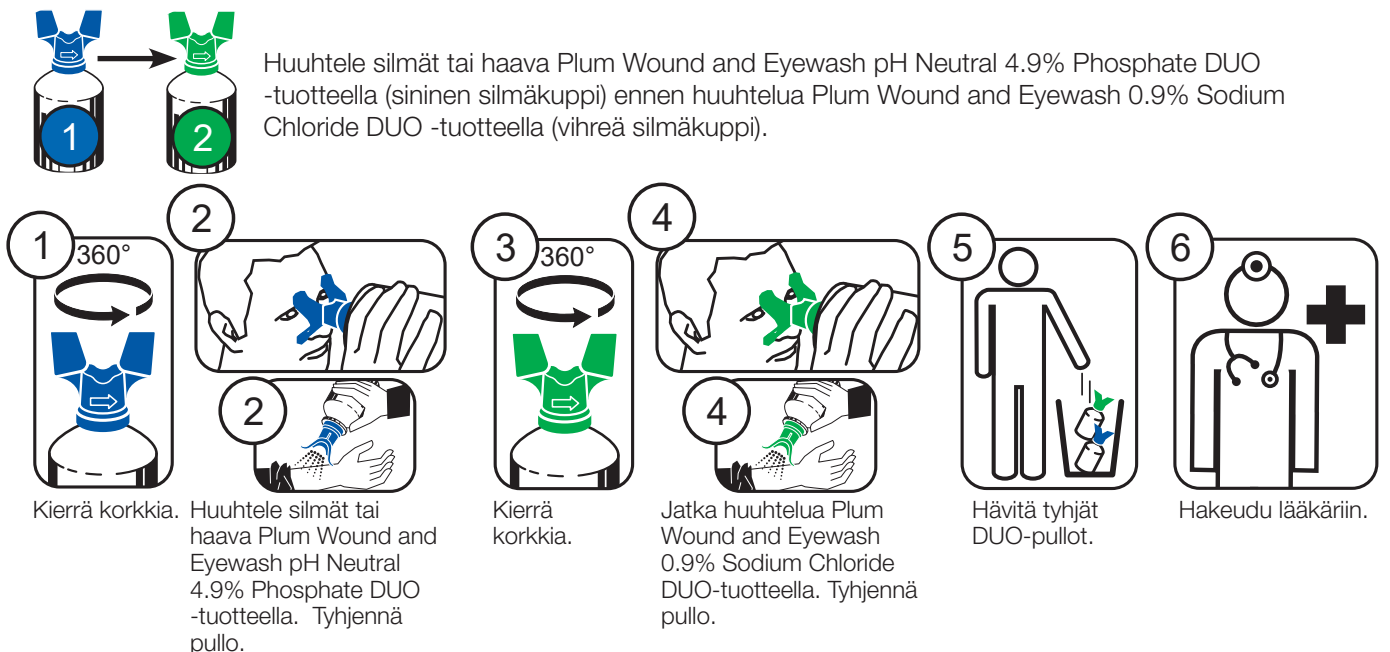

Huuhtelee silmät tai haava Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO -tuotteella (sininen silmäkuppi) ennen huuhtelua Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO -tuotteella (vihreä silmäkuppi).

- 1 360° Kierrä korkkia.
- 2 Huuhtelee silmät tai haava Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO -tuotteella. Tyhjennä pullo.
- 3 360° Kierrä korkkia.
- 4 Jatka huuhtelua Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO -tuotteella. Tyhjennä pullo.
- 5 Hävitä tyhjät DUO-pullot.
- 6 Hakeudu lääkäriin.

Varoitukset



Älä käytä tätä tuotetta tilanteissa, joihin liittyy fluorivetyhappoa sisältäviä roiskeita.



Älä käytä tätä tuotetta tilanteissa, joihin liittyy kalsiumia sisältäviä roiskeita.



Älä käytä tätä tuotetta tilanteissa, joihin liittyy natriumhypokloriittia (valkaisuaineet) sisältäviä roiskeita.

Symbolien selitykset

	Lisätietoja on etiketin taustapuolella olevassa lehtisessä		Revi irti / avaa etiketin uloin kerros lukeaksesi lehtisessä olevat lisätiedot
	Ilmoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan. Näytetään valmistajan nimen ja osoitteen yhteydessä.		Ilmaisee, miten pullo on käännettävä
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero		Älä käytä, jos pakkaus on vahingoittunut
	Yksinkertainen steriili sulkujärjestelmä		Älä käytä uudelleen. Lääkinnällinen laite on kertakäyttöinen
	Lääkinnällinen laite		Ilmoittaa valmistajan eräkoodin erän tunnistamiseksi
	Käytön lämpötilaraja		Viimeinen käyttöpäivä. Ilmoittaa päivän, jonka jälkeen lääkinnällistä laitetta ei saa käyttää
	Varastoinnin lämpötilaraja		Valmistuspäivä
	Varoitus. Aineet, jotka sisältävät kalsiumia, kuten kalsiumhydroksidi, sementti ja kalkki, voivat lisätä haittavaikutusten riskiä, jos sarveiskalvo on vahingoittunut. Seurauksena voi olla sarveiskalvon kalkkeutuminen		Varoitus. Siivousaineet (valkaisuaineet) sisältävät natriumhypokloriittia. Vaikka puskurin käyttö vähentää emäksen ärsyttävää vaikutusta, kloorin ärsyttävä vaikutus lisääntyy. Tämän vuoksi tuotteen käyttöä ei suositella tällaisten roiskeiden yhteydessä
	Varoitus. Fluorivetyhappo on myrkyllistä ja erittäin syövyttävää joutuessaan kosketuksiin silmien, ihon tai luiden kanssa. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate -tuotetta ei ole tarkoitettu ensiavuksi silmien tapaturmatilanteissa, joihin liittyy fluorivetyhappoa, sillä se ei rajoita fluorivetyhapon syövyttävää vaikutusta.		

Sivuvaikutukset/toimintahäiriöt

Tuotteet on suunniteltu ensiaputuotteiksi silmien huuhteluun. Mahdollisista sivuvaikutuksista tai toimintahäiriöistä on ilmoitettava Plum Safety ApS:lle osoitteeseen info@plum.eu tai puhelimitse numeroon +45 6916 9600, jotta tarvittaviin korjaaviin toimiin voidaan ryhtyä. Vakavista haittavaikutuksista on ilmoitettava aina asiaankuuluvalla toimivaltaisella viranomaiselle.

Yhteystiedot

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 •
Sähköposti: Info@plum.eu • Verkkosivusto: plum.eu