

Instructions d'utilisation

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Liste et noms de produits

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Réf. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Réf. 4801


Usage prévu

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate est un produit de premiers soins conçu pour l'irrigation des plaies et des yeux entrés accidentellement en contact avec des produits acides ou alcalins.

Instructions d'utilisation – pictogrammes – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

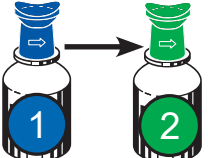


Rincer l'œil ou la plaie avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (œillère bleue) avant de rincer avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (œillère verte).

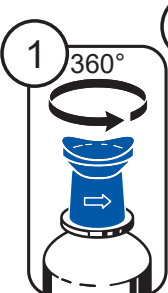


1 360°

Faire pivoter le capuchon pour ouvrir.

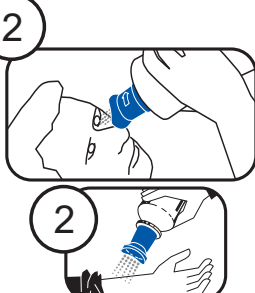


2

Rincer l'œil ou la plaie avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Vider la bouteille.

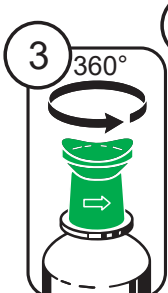


3 360°

Faire pivoter le capuchon pour ouvrir.

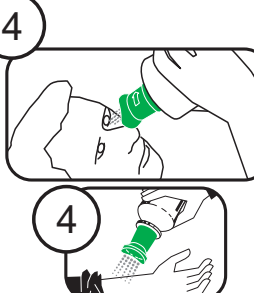


4

Continuer à rincer avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Vider la bouteille.

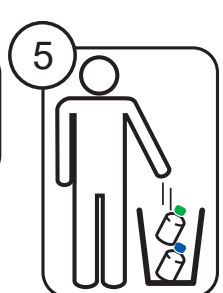

5


Jeter les bouteilles vides.

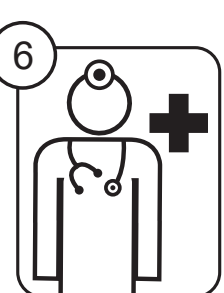


6

Demander un avis médical.

Instructions d'utilisation – pictogrammes – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

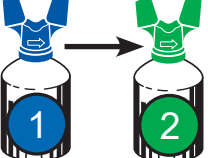


Rincer les yeux ou la plaie avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (œillère bleue) avant de rincer avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (œillère verte).

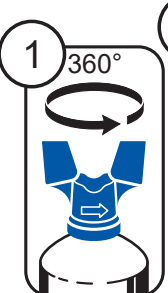


1 360°

Faire pivoter le capuchon pour ouvrir.

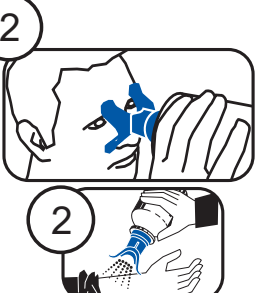


2

Rincer les yeux ou la plaie avec Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Vider la bouteille.

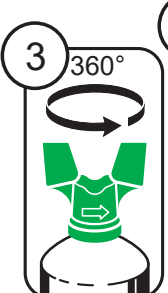


3 360°

Faire pivoter le capuchon pour ouvrir.

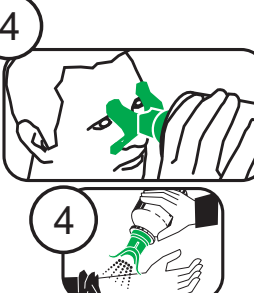


4

Continuer à rincer avec Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Vider la bouteille.

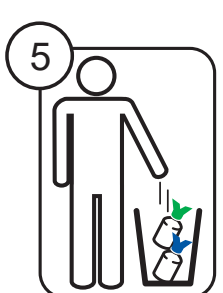

5

Jeter les bouteilles DUO vides.

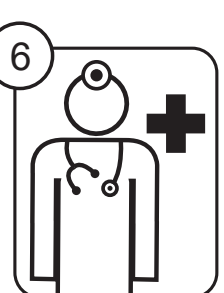

6

Demander un avis médical.

Avertissements



HF

Ne pas utiliser ce produit en cas d'incident impliquant des éclaboussures d'acide fluorhydrique.



Ca

Ne pas utiliser ce produit en cas d'incident impliquant des éclaboussures de calcium.



NaClO

Ne pas utiliser ce produit en cas d'incident impliquant des éclaboussures d'hypochlorite de sodium (substances blanchissantes).

Explication des symboles

	Pour plus d'informations, consulter le livret d'information situé à l'arrière de l'étiquette		Retirer/ouvrir l'étiquette extérieure pour lire le livret contenant les informations
	Indique le fabricant du dispositif médical et est accompagné du nom et de l'adresse du fabricant	CAUTION 	Explique comment la bouteille doit être tournée
	Marquage CE avec le numéro de l'organisme notifié		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Système de barrière stérile unique		Ne pas réutiliser. Ce dispositif médical est conçu exclusivement pour un usage unique
	Dispositif médical		Indique le code de lot du fabricant permettant d'identifier le lot
	Limite de température pour l'utilisation		Date limite d'utilisation. Indique la date à partir de laquelle le dispositif médical ne doit plus être utilisé
	Limite de température pour le stockage		Date de production
	Avertissement. Substances contenant du calcium telles que : hydroxyde de calcium, ciment et chaux. Peut augmenter le risque d'effets indésirables en cas de lésions de la cornée, ce qui peut occasionner une calcification de la cornée		Avertissement. Le NaClO peut se trouver dans les agents nettoyants (substances blanchissantes). Si l'utilisation d'un tampon permet de réduire l'effet irritant des produits alcalins, celui-ci augmente toutefois l'effet irritant du chlore. Pour cette raison, il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit en cas d'éclaboussures de ce type
	Avertissement. L'acide fluorhydrique est toxique et hautement corrosif pour les yeux, la peau et les os. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate n'est pas un produit de premiers soins conçu pour les accidents au niveau des yeux impliquant de l'acide fluorhydrique car il ne limite pas l'effet corrosif de l'acide fluorhydrique		

Effets secondaires / défaut

Les produits sont des produits de premiers soins conçus pour l'irrigation de l'œil. En cas d'effets secondaires ou de défauts, merci de bien vouloir en informer Plum Safety ApS, par e-mail à l'adresse info@plum.eu ou par téléphone au +45 6916 9600, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être prises. Tout effet indésirable grave doit impérativement être signalé à une autorité compétente.

Contact

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email : Info@plum.eu • Site Web : plum.eu