

Upute za uporabu

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Popis i nazivi proizvoda

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Predviđena namjena

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate proizvod je za prvu pomoć namijenjen za ispiranje rana i očiju pri nezgodama s kiselinama i lužinama.


Upute za uporabu – piktogrami – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

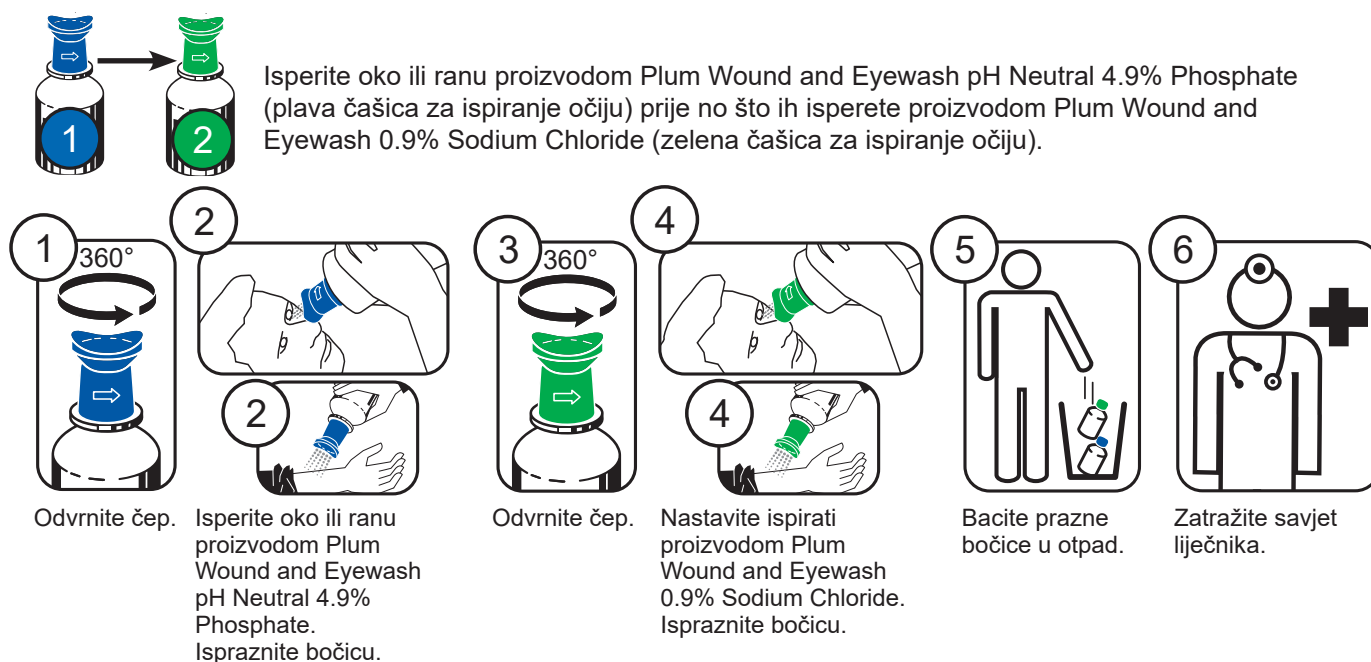

Isperite oko ili ranu proizvodom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (plava čašica za ispiranje očiju) prije no što ih isperete proizvodom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zelena čašica za ispiranje očiju).

- 1 360°
Odvrnite čep.
- 2
Isperite oko ili ranu proizvodom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Ispraznite bočicu.
- 3 360°
Odvrnite čep.
- 4
Nastavite ispirati proizvodom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Ispraznite bočicu.
- 5
Bacite prazne bočice u otpad.
- 6
Zatražite savjet liječnika.

Upute za uporabu – piktogrami – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

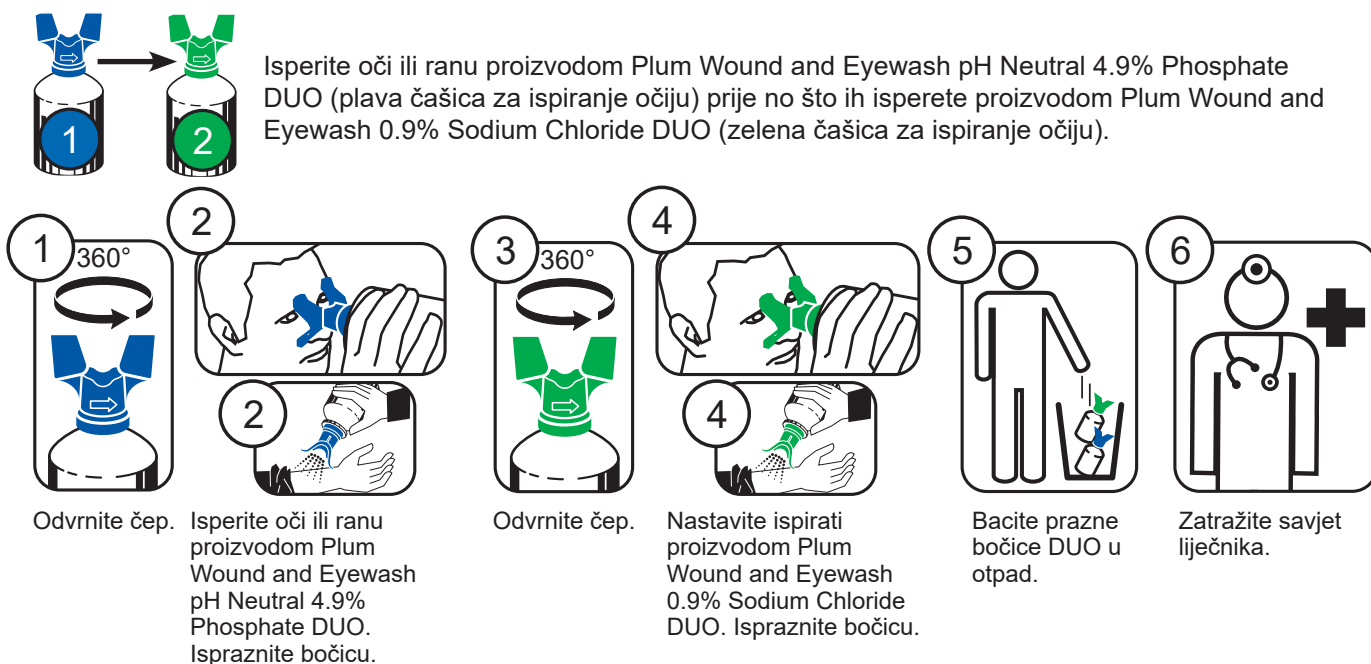

Isperite oči ili ranu proizvodom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (plava čašica za ispiranje očiju) prije no što ih isperete proizvodom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (zelena čašica za ispiranje očiju).

- 1 360°
Odvrnite čep.
- 2
Isperite oči ili ranu proizvodom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Ispraznite bočicu.
- 3 360°
Odvrnite čep.
- 4
Nastavite ispirati proizvodom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Ispraznite bočicu.
- 5
Bacite prazne bočice DUO u otpad.
- 6
Zatražite savjet liječnika.

Upozorenja



HF

Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u slučaju štetnih događaja povezanih s prskanjem tvari koje sadržavaju fluorovodičnu kiselinu.



Ca


Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u slučaju štetnih događaja povezanih s prskanjem tvari koje sadržavaju kalcij.



NaClO

Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u slučaju štetnih događaja povezanih s prskanjem tvari koje sadržavaju natrijev hipoklorit (tvari za izbjeljivanje).

Objašnjenje simbola

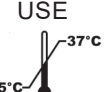	Dodatne informacije pronađite u knjižnici sa stražnje strane oznake		Odljepite/otvorite vanjski sloj oznake kako biste pročitali knjižicu s dodatnim informacijama
	Označava proizvođača medicinskog proizvoda; prikazuje se uz naziv i adresu proizvođača.		Upućuje na to kako treba okrenuti bočicu
	Oznaka CE s brojem prijavljenog tijela		Nemojte upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
	Sustav jednostruke sterilne barijere		Nemojte ponovno upotrebljavati. Medicinski je proizvod namijenjen samo za jednokratnu uporabu
	Medicinski proizvod		Proizvođačeva oznaka serije koja označava seriju proizvoda
	Ograničenje temperature za uporabu		Rok trajanja. Označava datum nakon kojeg se medicinski proizvod ne smije upotrebljavati
	Ograničenje temperature za pohranu		Datum proizvodnje
	Ca		NaClO
	Upozorenje. Tvari koje sadržavaju kalcij, kao što su kalcijev hidroksid, cement i vapno, mogu povećati rizik od neželjenih učinaka u slučaju oštećenja rožnice, koji mogu dovesti do kalcifikacije rožnice		Upozorenje. NaClO može se nalaziti u sredstvima za čišćenje (izbjeljivačima). Iako se nadražujuće djelovanje lužina ublažava primjenom pufera, nadražujuće djelovanje klora pojačava se. Stoga se uporaba proizvoda ne preporučuje u slučaju prskanja tih tvari
	HF		
	Upozorenje. Fluorovodična je kiselina otrovna i izrazito nagrizajuća za oči, kožu i kosti. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate nije namijenjen kao prva pomoć za oči pri nezgodama s fluorovodičnom kiselinom jer ne ograničava nagrizajuće djelovanje fluorovodika.		

Nuspojave / neispravnost

Proizvodi su namijenjeni za pružanje prve pomoći ispiranjem očiju. Ako dođe do nuspojava ili neispravnosti, prijavite ih društvu Plum Safety ApS na e-adresu info@plum.eu ili broj telefona +45 6916 9600 kako bi se mogle poduzeti potrebne korektivne mjere. Ozbiljne neželjene učinke uvijek je potrebno prijaviti mjerodavnome nadležnom tijelu.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • E-adresa: Info@plum.eu • Mrežno mjesto: plum.eu