

Notkunarleiðbeiningar

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Vörulisti og -heiti

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Tilv. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Tilv. 4801

Ætlaður tilgangur

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er skyndihjálparvara sem er ætluð til að skola sár og augu eftir slys með sýrur og basa.


Notkunarleiðbeiningar - myndtákn - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

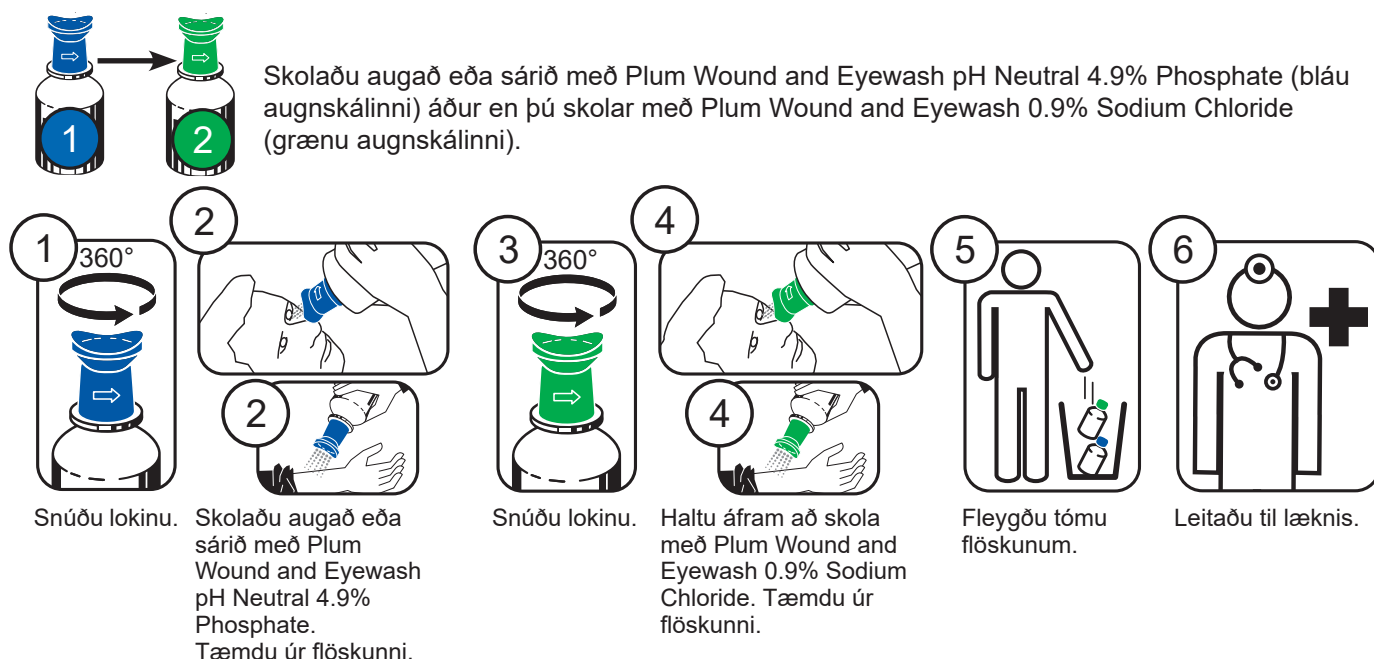

Skolaðu augað eða sárið með Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (bláu augnskálinni) áður en þú skolar með Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (grænu augnskálinni).

- 1 360° Snúðu lokinu.
- 2 Skolaðu augað eða sárið með Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Tæmdu úr flöskunni.
- 3 360° Snúðu lokinu.
- 4 Haltu áfram að skola með Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Tæmdu úr flöskunni.
- 5 Fleygðu tómu flöskunum.
- 6 Leitaðu til læknis.

Notkunarleiðbeiningar - myndtákn - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

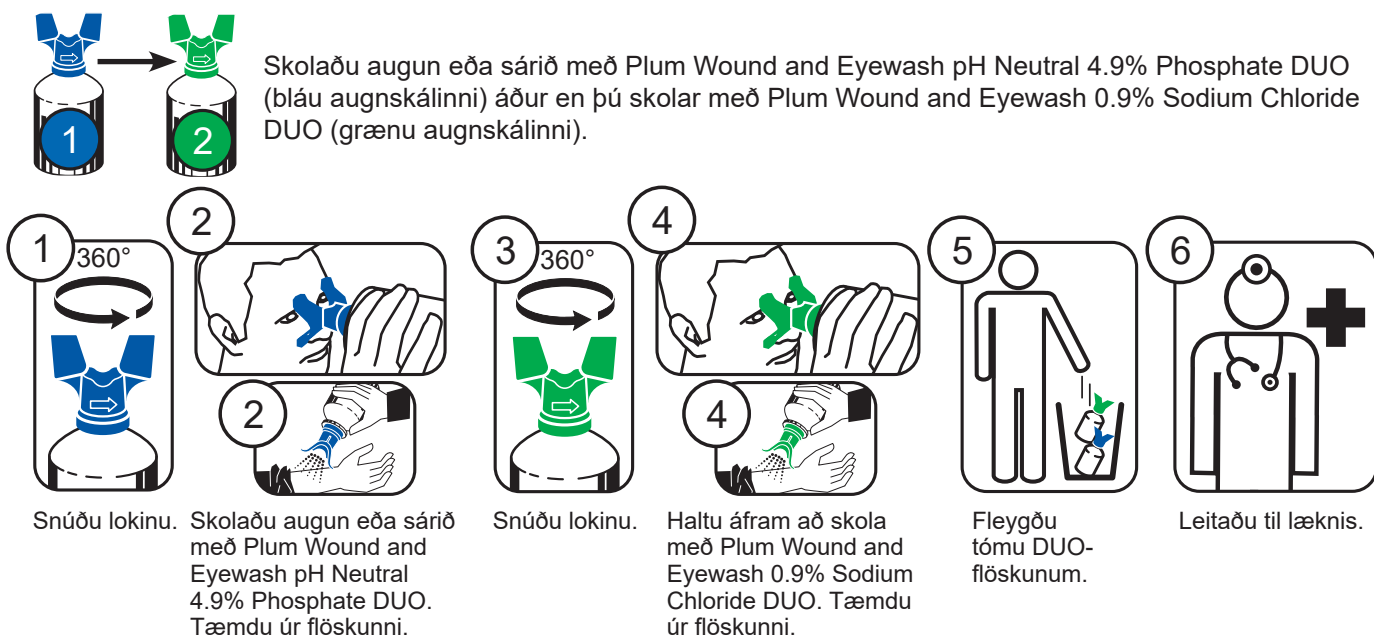

Skolaðu augun eða sárið með Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (bláu augnskálinni) áður en þú skolar með Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (grænu augnskálinni).

- 1 360° Snúðu lokinu.
- 2 Skolaðu augun eða sárið með Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Tæmdu úr flöskunni.
- 3 360° Snúðu lokinu.
- 4 Haltu áfram að skola með Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Tæmdu úr flöskunni.
- 5 Fleygðu tómu DUO-flöskunum.
- 6 Leitaðu til læknis.

Viðvaranir



Ekki má nota þessa vöru í tilvikum þar sem vökvi sem inniheldur flúorsýru skvettist.



Ekki má nota þessa vöru í tilvikum þar sem vökvi sem inniheldur natríumhýpóklórít (bleikiefni) skvettist.



Ekki má nota þessa vöru í tilvikum þar sem vökvi sem inniheldur kalsíum skvettist.

Útskýring á táknum

	Frekari upplýsingar er að finna í bæklingi aftan á merkimiðanum		Flettu ytra lagi merkimiðans af eða opnaðu það til að lesa bæklinginn með frekari upplýsingum
	Gefur til kynna framleiðanda lækningatækis og er sýnt ásamt nafni og heimilisfangi framleiðandans		Segir til um hvernig snúa skal flöskunni
	CE-merking með númeri tilkynnts aðila		Ekki nota ef pakkningin er skemmd
	Einfalt sæfingarinnsgli		Má ekki nota aftur. Lækningatækið er einungis ætlað til notkunar í eitt skipti.
	Lækningatæki		Segir til um lotunúmer framleiðanda til að auðkenna lotuna.
	Hitastigsmörk við notkun		Fyrningardagsetning. Segir til um eftir hvaða dagsetningu má ekki nota lækningatækið.
	Hitastigsmörk fyrir geymslu		Framleiðsludagur
	Viðvörðun. Efni sem innihalda kalsíum (eins og kalsíumhýdroxíð, sement og kalk) geta aukið hættuna á aukaverkunum ef hornhimnuskemmdir eiga sér stað, sem geta leitt til hornhimnukölkunar.		Viðvörðun. NaClO er að finna í hreinsiefni (bleikiefni). Jafnvel þótt notkun jafnalausnar dragi úr ertandi áhrifum basa, aukast ertandi áhrif klórs. Það er því ekki ráðlagt að nota vöruna þegar vökvi af þessu tagi skvettist.
	Viðvörðun. Flúorsýra er eitruð og mjög ætandi fyrir augu, húð og bein. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate er ekki ætlað til skyndihjálp vegna slysa á augum þar sem flúorsýra kemur við sögu, vegna þess að það takmarkar ekki ætandi áhrif flúorsýru.		

Aukaverkanir og ágallar

Vörurnar eru ætlaðar sem skyndihjálparvörur til að skola augu. Ef vart verður við aukaverkanir eða ágalla skal tilkynna það til Plum Safety ApS, á netfangið info@plum.eu eða í síma +45 6916 9600, svo hægt sé að gera nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta. Alvarlegar aukaverkanir skal ávallt tilkynna til þar til bærs yfirvalds.

Samskiptaupplýsingar

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Netfang: Info@plum.eu • Vefsíða: plum.eu