

Istruzioni per l'uso

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Lista prodotti e nomi

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Rif. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Rif. 4801


Destinazione d'uso

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate è un prodotto di primo soccorso per l'irrigazione di ferite e occhi in caso di incidenti con acidi e alcali.


Istruzioni per l'uso – pittogrammi – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

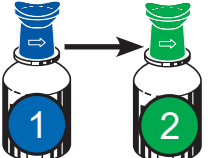


Sciacqua l'occhio o la ferita con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (occhiera blu) prima di sciacquare con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (occhiera verde).

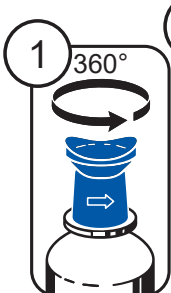


1 Svita il tappo.

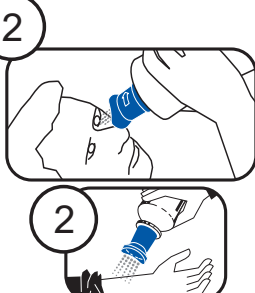

2 Sciacqua l'occhio o la ferita con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Svuota il flacone.

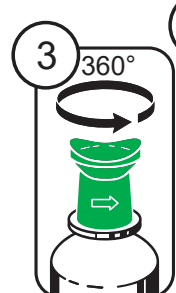


3 Svita il tappo.

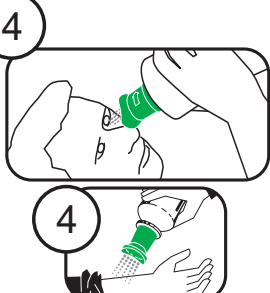

4 Continua il risciacquo con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Svuota il flacone.




5 Getta i flaconi vuoti.

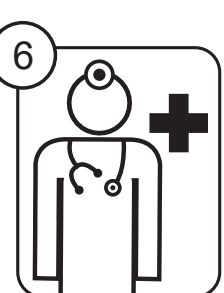

6 Rivolgerti a un medico.


Istruzioni per l'uso – pittogrammi – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

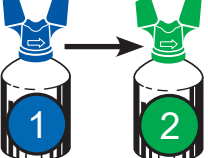


Sciacqua gli occhi o la ferita con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (occhiera blu) prima di sciacquare con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (occhiera verde).




1 Svita il tappo.

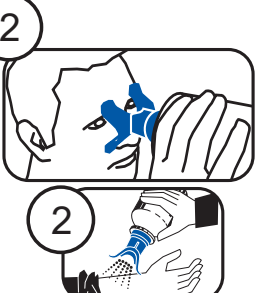

2 Sciacqua gli occhi o la ferita con Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Svuota il flacone.

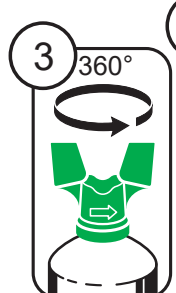


3 Svita il tappo.

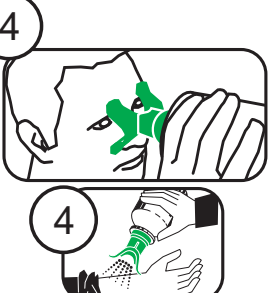

4 Continua il risciacquo con Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Svuota il flacone.



5 Getta i flaconi DUO vuoti.

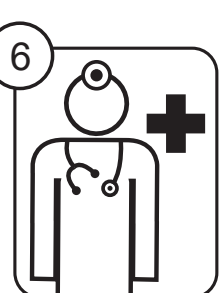

6 Rivolgerti a un medico.

Avvertenze



Non usare questo prodotto in caso di incidenti con schizzi di acido fluoridrico.



Non utilizzare questo prodotto in caso di incidenti con schizzi di ipoclorito di sodio (candeggianti).



Non usare questo prodotto in caso di incidenti con schizzi di calcio.

Spiegazione dei simboli

	Maggiori informazioni nell'opuscolo sul retro dell'etichetta		Staccare/aprire lo strato esterno dell'etichetta per leggere l'opuscolo contenente ulteriori informazioni
	Indica il fabbricante del dispositivo medico ed è accompagnato dal nome e dall'indirizzo del fabbricante.		Indica il verso della bottiglia
	Marchio CE con il numero di organismo notificato		Non usare se la confezione è danneggiata
	Sistema di barriera sterile singola		Non riutilizzare. Il dispositivo medico deve essere utilizzato solo una volta.
	Dispositivo medico		Indica il codice del lotto del fabbricante e consente di identificare la partita o il lotto.
	Limite di temperatura per l'utilizzo		Data di scadenza. Indica la data dopo la quale il dispositivo medico non deve più essere utilizzato.
	Limite di temperatura per la conservazione		Data di produzione
	Avvertenze. Le sostanze contenenti calcio, come l'idrossido di calcio, il cemento e la calce, possono aumentare il rischio di effetti avversi in caso di danno corneale, che potrebbe portare alla calcificazione corneale.		Avvertenze. L'NaClO si può trovare negli agenti pulenti (candeggine). Nonostante l'effetto irritante degli alcali venga ridotto dall'uso del tampone, l'effetto irritante del cloro aumenta. Pertanto l'uso del prodotti in caso di contatto con tali schizzi non è raccomandato.
	Avvertenze. L'acido fluoridrico è tossico e altamente corrosivo per occhi, cute e ossa. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate non è indicato come dispositivo di primo soccorso in caso di incidenti oculari con acido fluoridrico in quanto non limita l'effetto corrosivo dell'acido fluoridrico.		

Effetti collaterali/malfunzionamento

I prodotti sono concepiti come dispositivi di primo soccorso per l'irrigazione degli occhi. Se si verificano effetti collaterali o malfunzionamenti, si prega di segnalarli a Plum Safety ApS, info@plum.eu o al numero di telefono +45 6916 9600, in modo da poter avviare le necessarie misure correttive. Gli effetti avversi gravi devono essere sempre segnalati alle autorità competenti.

Contatti

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-mail: Info@plum.eu • Sito web: plum.eu