

Naudojimo instrukcija

„Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate“


Produktų sąrašas ir pavadinimai

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Nr. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Nr. 4801

Numatytoji paskirtis

„Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate“ – tai pirmosios pagalbos priemonė žaizdų ir akių nuplovimui nelaimingų atsitikimų su rūgštimis ir šarmais atveju.


Naudojimo instrukcija - piktogramos - „Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate“

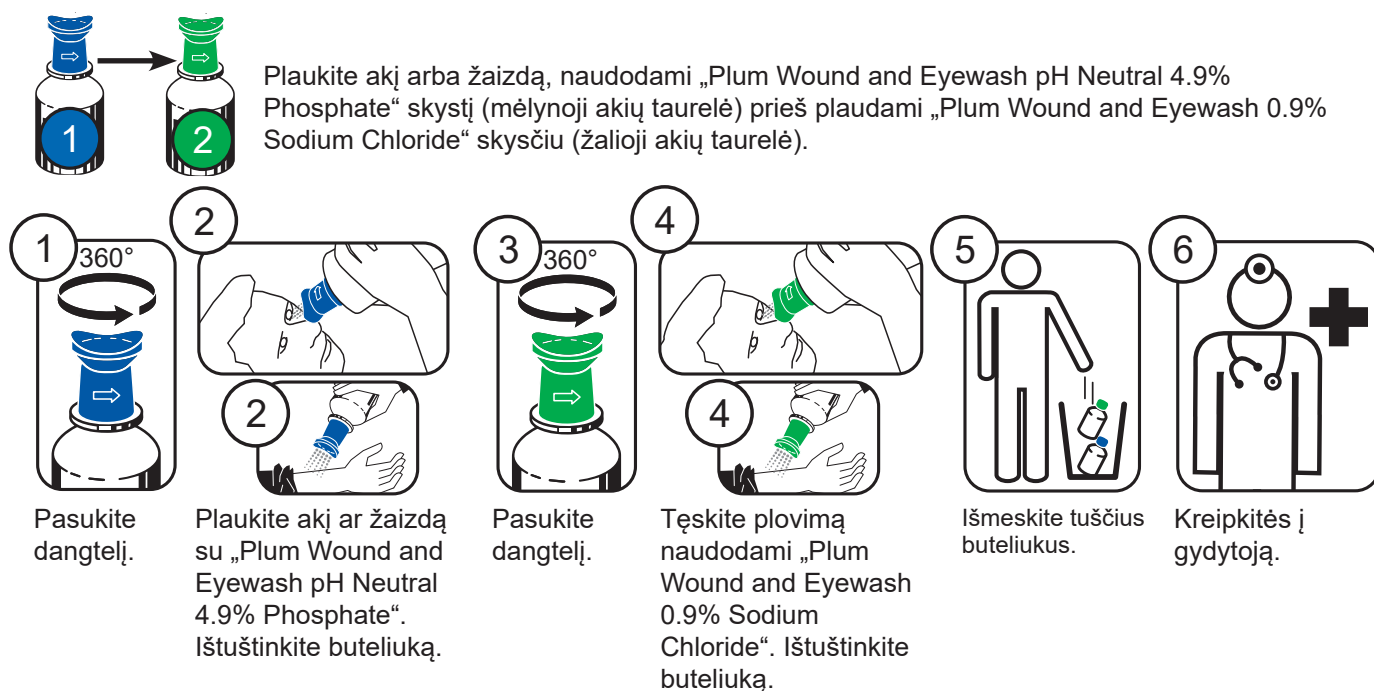

Plaukite akį arba žaizdą, naudodami „Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate“ skystį (mėlynoji akių taurelė) prieš plaudami „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride“ skysčiu (žalioji akių taurelė).

- 1 360° Pasukite dangtelį.
- 2 Plaukite akį ar žaizdą su „Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate“. Ištuštinkite buteliuką.
- 3 360° Pasukite dangtelį.
- 4 Tęskite plovimą naudodami „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride“. Ištuštinkite buteliuką.
- 5 Išmeskite tuščius buteliukus.
- 6 Kreipkitės į gydytoją.

Naudojimo instrukcija - piktogramos - „Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO“

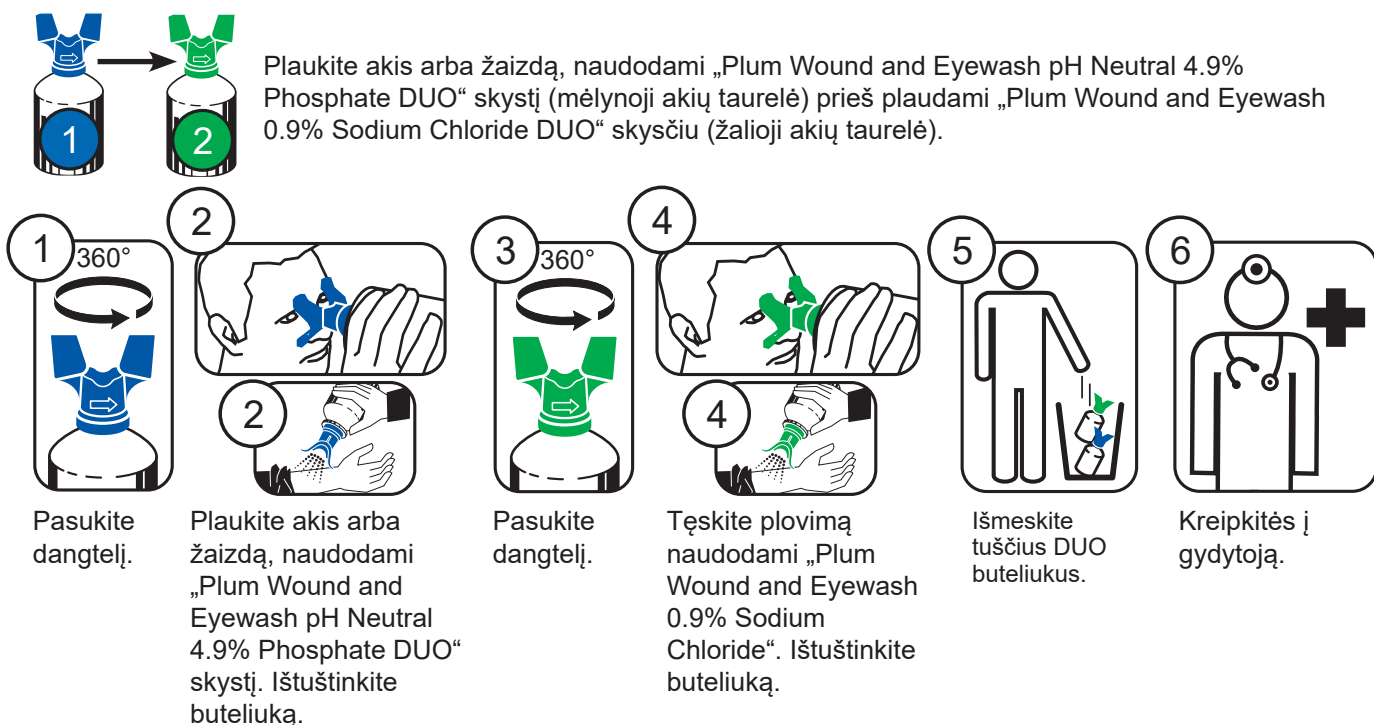

Plaukite akis arba žaizdą, naudodami „Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO“ skystį (mėlynoji akių taurelė) prieš plaudami „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO“ skysčiu (žalioji akių taurelė).

- 1 360° Pasukite dangtelį.
- 2 Plaukite akis arba žaizdą, naudodami „Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO“ skystį. Ištuštinkite buteliuką.
- 3 360° Pasukite dangtelį.
- 4 Tęskite plovimą naudodami „Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride“. Ištuštinkite buteliuką.
- 5 Išmeskite tuščius DUO buteliukus.
- 6 Kreipkitės į gydytoją.

Įspėjimai



HF

Nenaudokite šio gaminio incidentų su purslais, kuriuose yra fluoro vandenilio rūgšties, atveju.



Ca

Nenaudokite šio gaminio incidentų su purslais, kuriuose yra kalcio, atveju.



NaClO

Nenaudokite šio gaminio incidentų su purslais, kuriuose yra natrio hipochlorito (baliklio medžiagų), atveju.

Simbolių paaiškinimas

	Daugiau informacijos galite rasti kitoje etiketės pusėje esančioje brošiūroje		Kad perskaitytume brošiūroje esančią papildomą informaciją, nulupkite arba atplėškite išorinį etiketės sluoksnį
	Nurodo medicinos priemonės gamintoją, jo pavadinimą ir adresą		Nurodo, kuria kryptimi laikyti buteliuką
	CE ženklas su notifikuotosios įstaigos numeriu		Nenaudokite, jei pakuotė pažeista
	Vienkartinė sterili barjerinė sistema		Nenaudoti pakartotinai. Ši medicinos priemonė skirta tik vienkartiniam naudojimui.
	Medicinos priemonė		Nurodo gamintojo partijos kodą, kad būtų galima identifikuoti partiją arba seriją.
	Naudojimo temperatūros riba		Panaudoti iki. Nurodo datą, po kurios medicinos priemonės naudoti nebegalima.
	Laikymo temperatūros riba		Pagaminimo data
 Ca	Įspėjimas. Medžiagos, kurių sudėtyje yra kalcio, pavyzdžiui, kalcio hidroksidas, cementas ir kalkės, gali padidinti nepageidaujamo poveikio riziką, jei atsiranda ragenos pažeidimas, galintis sukelti ragenos kalcifikaciją.	 NaClO	Įspėjimas. NaClO galima rasti valymo priemonėse (balikliuose). Nors naudojant buferį šarmų dirginamasis poveikis sumažėja, chloro dirginamasis poveikis padidėja. Todėl produkto nerekomenduojama naudoti esant tokio tipo purslams.
 HF	Įspėjimas. Fluoro vandenilio rūgštis yra toksiška ir labai ėsdinanti akis, odą ir kaulus. „Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate“ nėra skirtas naudojimui kaip pirmoji pagalba įvykus nelaimingam atsitikimui su fluoro vandenilio rūgštimi, nes jis neapriboja korozinio fluoro vandenilio poveikio.		

Šalutiniai poveikiai ir (arba) sutrikimai

Produktai sukurti kaip pirmosios pagalbos priemonė akių drėkinimui. Iškilus šalutiniams poveikiams arba sutrikimams, praneškite apie juos „Plum Safety ApS“ el. paštu info@plum.eu arba tel. +45 6916 9600, kad būtų galima imtis būtinų žalos ištaisymo priemonių. Apie rimtą neigiamą poveikį visada derėtų pranešti atitinkamai kompetentingai institucijai.

Kontaktai

„Plum Safety ApS“ • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • El. p. Info@plum.eu • Tinklalapis: plum.eu