

Gebruiksaanwijzing

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Productlijst en namen

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Beoogd gebruik

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate is een eerstehulpmiddel voor irrigatie van wonden en ogen na ongevallen met zuren en alkaliën.


Gebruiksaanwijzing - pictogrammen - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

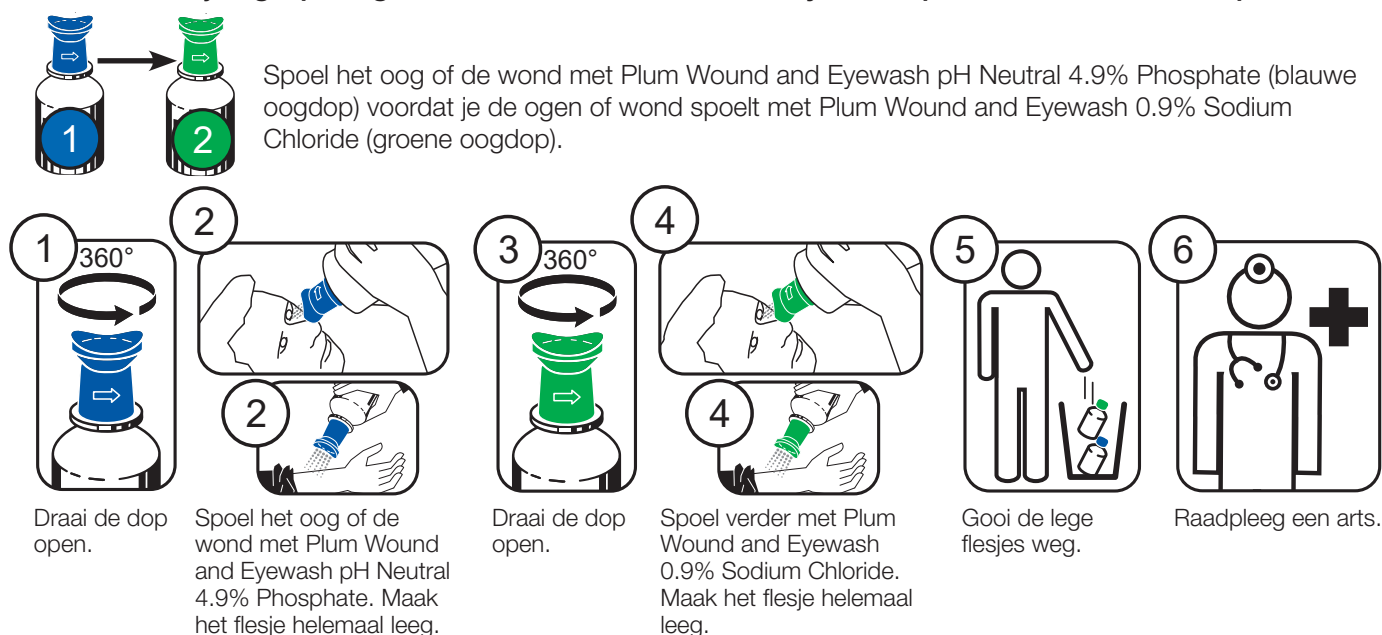

Spoel het oog of de wond met Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (blauwe oogdop) voordat je de ogen of wond spoelt met Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (groene oogdop).

- 1 360°
Draai de dop open.
- 2
Spoel het oog of de wond met Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Maak het flesje helemaal leeg.
- 3 360°
Draai de dop open.
- 4
Spoel verder met Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Maak het flesje helemaal leeg.
- 5
Gooi de lege flesjes weg.
- 6
Raadpleeg een arts.

Gebruiksaanwijzing - pictogrammen - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

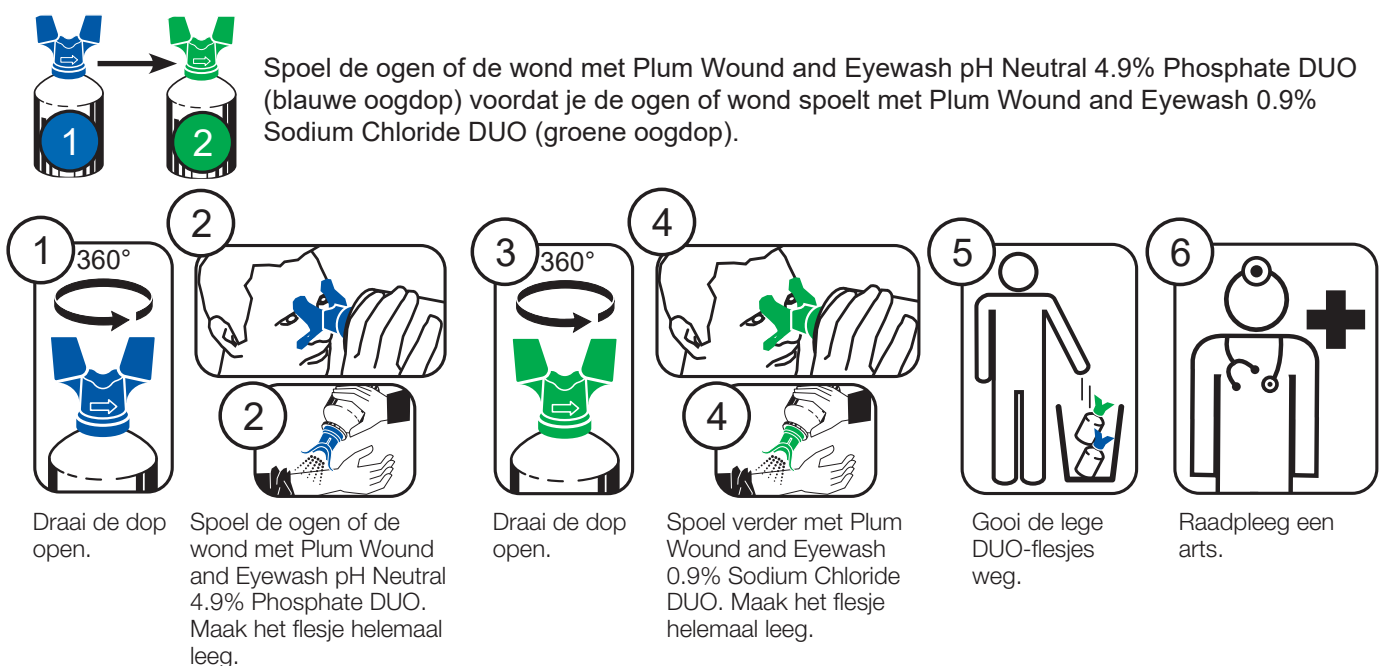

Spoel de ogen of de wond met Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (blauwe oogdop) voordat je de ogen of wond spoelt met Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (groene oogdop).

- 1 360°
Draai de dop open.
- 2
Spoel de ogen of de wond met Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Maak het flesje helemaal leeg.
- 3 360°
Draai de dop open.
- 4
Spoel verder met Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Maak het flesje helemaal leeg.
- 5
Gooi de lege DUO-flesjes weg.
- 6
Raadpleeg een arts.

Waarschuwingen



HF

Gebruik dit product niet als er sprake is van waterstoffluoride.



Ca

Gebruik dit product niet als er sprake is van calcium.



NaClO

Gebruik dit product niet als er sprake is van natriumhypochloriet (bleekmiddel).

Verklaring van symbolen

	Zie het boekje op de achterkant van het		Open / trek de buitenste laag van het etiket voor het boekje met meer informatie
	etiket voor meer informatie		Geeft aan hoe de fles rechtop moet worden gehouden
	CE-markering met nummer aangemelde instantie		Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Enkel steriel barrièresysteem		Niet opnieuw gebruiken. Dit medische hulpmiddel is bedoeld voor eenmalig gebruik.
	Medisch hulpmiddel		Informatie over de batchcode van de fabrikant om de batch/lot te identificeren.
	Maximale en minimale gebruikstemperatuur		Houdbaarheidsdatum. Geeft aan na welke datum het medische hulpmiddel niet meer mag worden gebruikt.
	Maximale en minimale bewaartemperatuur		Productiedatum
 Ca	Waarschuwing. Calciumhoudende stoffen zoals: calciumhydroxide, cement en kalk, kunnen het risico van schadelijke effecten verhogen als er beschadiging van het hoornvlies optreedt. Dit kan leiden tot kalkafzettingen in het hoornvlies.	 NaClO	Waarschuwing. NaClO zit vaak in schoonmaakmiddelen (bleek). Het irriterende effect van loog wordt verminderd door het gebruik van de buffer, maar het irriterende effect van chloor zal toenemen. Het wordt daarom afgeraden dit product te gebruiken als er sprake is van natriumhypochloriet.
 HF	Waarschuwing. Waterstoffluoride is giftig en zeer bijtend voor de ogen, huid en botten. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate is niet bedoeld als eerstehulpmiddel bij oogletsel door waterstoffluoride, omdat dit het bijtende effect van HF niet tegengaat.		

Bijwerkingen/slechte werking

De producten zijn ontworpen als eerstehulpmiddelen voor irrigatie van wonden en ogen. Als er bijwerkingen of een slechte werking worden ervaren, meld dit dan aan Plum Safety ApS, info@plum.eu of bel +45 6916 9600, zodat er corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Ernstige bijwerkingen moeten altijd worden gemeld aan de juiste bevoegde autoriteit.

Contactgegevens

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: info@plum.eu • Website: plum.eu

Versie: 1.4 - Wijzigingsdatum: 11-11-2024 / nl 13-11-2024