

Instrukcja użytkowania

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Lista produktów i ich nazwy

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Nr. ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Nr. ref. 4801


Przeznaczenie

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate to produkt pierwszej pomocy do płukania ran i oczu w przypadku zanieczyszczenia kwasami i zasadami.

Instrukcja użytkowania – piktogramy – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

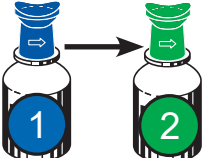


Przemyć oko lub ranę płynem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (niebieska muszla oczna) przed przemywaniem płynem Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zielona muszla oczna).

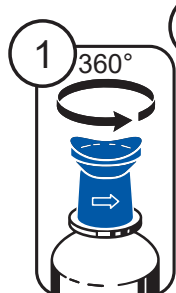


1 360°

Przekręcić zakrętkę.

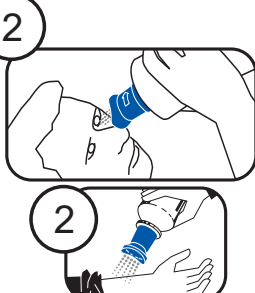


2

Przemyć oko lub ranę płynem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Opróżnić butelkę.

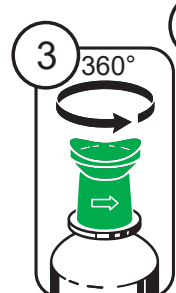

3 360°

Przekręcić zakrętkę.

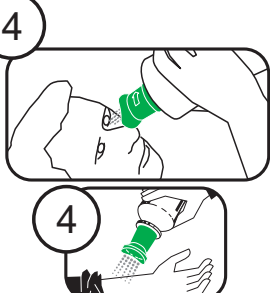


4

Kontynuować płukanie płynem Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Opróżnić butelkę.



5


Wyrzucić pustą butelkę.

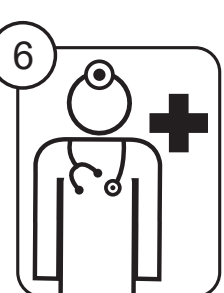


6

Zasięgnąć porady lekarza.

Instrukcja użytkowania – piktogramy – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

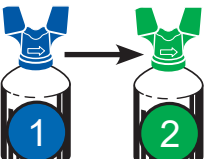


Przemyć oczy lub ranę płynem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (niebieska muszla oczna) przed przemywaniem płynem Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (zielona muszla oczna).

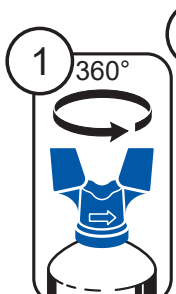


1 360°

Przekręcić zakrętkę.

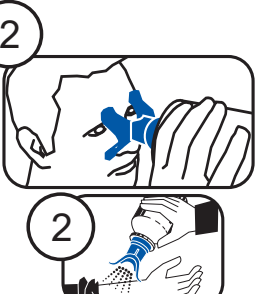


2

Przemyć oczy lub ranę płynem Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Opróżnić butelkę.

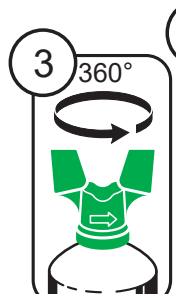


3 360°

Przekręcić zakrętkę.

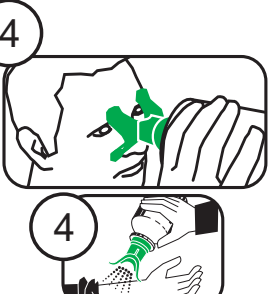


4

Kontynuować płukanie płynem Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Opróżnić butelkę.

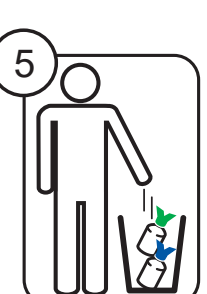

5

Wyrzucić pustą butelkę DUO.

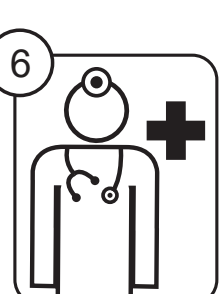

6

Zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenia



Nie należy używać tego produktu w przypadku rozprysków zawierających kwas fluorowodorowy.



Nie należy używać tego produktu w przypadku rozprysków zawierających podchloryn sodu (substancje wybielające).



Nie należy używać tego produktu w przypadku rozprysków zawierających wapń.

Objaśnienie symboli

	Więcej informacji można znaleźć w broszurze na odwrocie etykiety		Odkleić/otworzyć zewnętrzną warstwę etykiety, aby przeczytać broszurę mieszczącą więcej informacji
	Oznacza producenta wyrobu medycznego i obejmuje nazwę oraz adres producenta		Instruuje, jak należy obrócić butelkę
	Oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej		Nie używać, jeżeli opakowanie zostało uszkodzone
	System pojedynczej bariery sterylnej		Nie używać ponownie. Wyrób medyczny jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.
	Wyrób medyczny		Oznacza nadany przez producenta kod partii pozwalający zidentyfikować partię wyrobów.
	Zakres temperatur użytkowania		Data ważności. Wskazuje datę, po której wyrób medyczny nie może zostać użyty.
	Zakres temperatur przechowywania		Data produkcji
	Ostrzeżenie. Substancje zawierające wapń, takie jak wodorotlenek wapnia, cement i wapno, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku uszkodzenia rogówki, co może prowadzić do zwapnienia rogówki.		Ostrzeżenie. NaClO występuje w środkach czyszczących (wybielaczach). Choć działanie drażniące zasad zostanie zmniejszone poprzez użycie buforu, działanie drażniące chloru zostanie zwiększone. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu w przypadku rozprysków takich substancji.
	Ostrzeżenie. Kwas fluorowodorowy jest toksyczny i ma silne działanie żrące na oczy, skórę oraz kości. Płyn Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate nie jest przeznaczony do stosowania jako środek pierwszej pomocy w razie wypadków z udziałem kwasu fluorowodorowego, ponieważ nie ogranicza jego żrącego działania.		

Działania niepożądane / nieprawidłowe działanie

Niniejsze produkty są przeznaczone do stosowania jako środek pierwszej pomocy do płukania oczu. Przypadki działań niepożądanych lub nieprawidłowego działania należy zgłaszać firmie Plum Safety ApS, pisząc na adres info@plum.eu lub dzwoniąc pod numer +45 6916 9600, co pozwoli zainicjować odpowiednią procedurę naprawczą. Poważne działania niepożądane należy zawsze zgłaszać właściwym organom.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalléen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-mail: Info@plum.eu • Adres WWW: plum.eu