

Instruções de utilização

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Lista de produtos e designações

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Finalidade prevista

O Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate é um produto de primeiros socorros para irrigação de feridas e olhos quando ocorrem acidentes com ácidos e alcalis.

Instruções de utilização - pictogramas - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

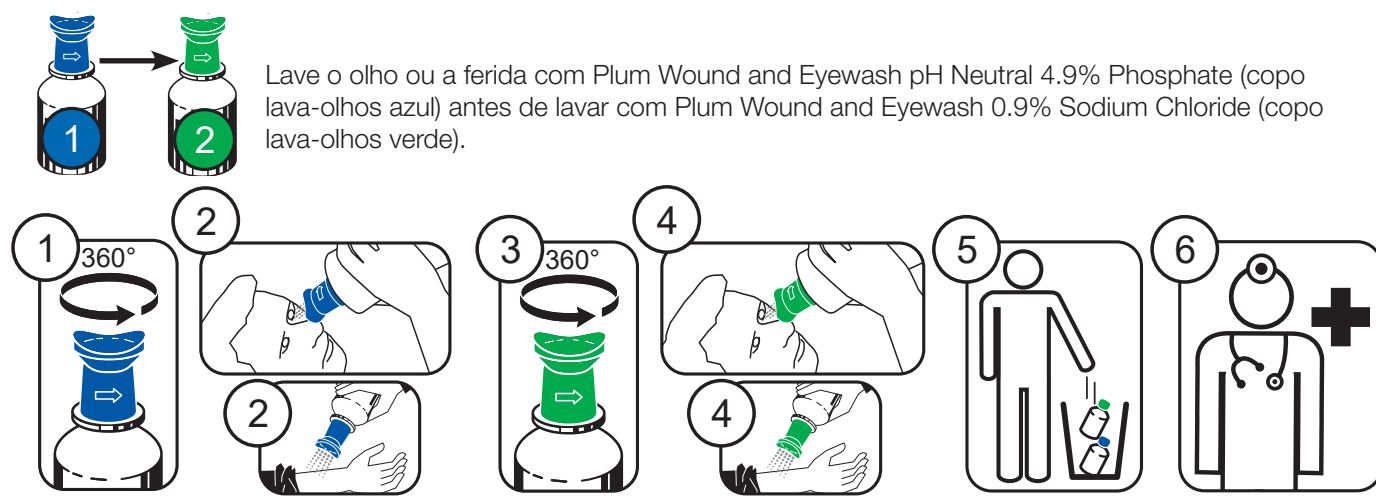

Lave o olho ou a ferida com Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (copo lava-olhos azul) antes de lavar com Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (copo lava-olhos verde).

- 1 360°
Rode a tampa..
- 2
Lave o olho ou a ferida com Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Esvazie e frasco.
- 3 360°
Rode a tampa.
- 4
Continue a lavar com Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Esvazie e frasco.
- 5
Elimine os frascos vazios.
- 6
Procure assistência médica.

Instruções de utilização - pictogramas - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO



Lave os olhos ou a ferida com Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (copo lava-olhos azul) antes de lavar com Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (copo lava-olhos verde).

- 1 360°
Rode a tampa.
- 2
Lave os olhos ou a ferida com Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Esvazie e frasco.
- 3 360°
Rode a tampa.
- 4
Continue a lavar com Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Esvazie e frasco.
- 5
Elimine os frascos DUO vazios.
- 6
Procure assistência médica.

Advertências



Não utilizar este produto em incidentes com salpicos que contenham ácido fluorídrico.




Não utilizar este produto em incidentes com salpicos que contenham ácido cálcio.



Não utilizar este produto em incidentes com salpicos que contenham hipoclorito de sódio (substâncias branqueadoras).

Explicação dos símbolos

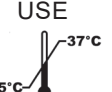	Para obter mais informações, consulte o folheto informativo no verso do rótulo		Descole/abra a camada exterior do rótulo para ler o folheto informativo e obter mais informações
	Indica o fabricante do dispositivo médico e é apresentado juntamente com o nome e o endereço do fabricante		Indica a forma como o frasco deve ser rodado
	Marcação CE com número de organismo notificado		Não utilizar se a embalagem estiver danificada.
	Sistema único de barreira estéril		Não reutilizar. O dispositivo médico destina-se a uma única utilização.
	Dispositivo médico		Indica o código de lote do fabricante para identificar o lote.
	Limite de temperatura de utilização		Data de validade. Indica a data após a qual o dispositivo médico não deve ser utilizado.
	Limite de temperatura de conservação		Data de produção
	Advertência. Substâncias que contenham cálcio, tais como: hidróxido de cálcio, cimento e cal, podem aumentar o risco de efeitos adversos se ocorrerem danos na córnea, o que pode levar à calcificação da córnea.		Advertência. O NaClO pode ser encontrado em produtos de limpeza (lixívia). Embora o efeito irritante dos álcalis seja reduzido pela utilização de uma solução tampão, o efeito irritante do cloro será aumentado. Por conseguinte, não se recomenda a utilização do produto em caso de salpicos deste tipo.
	Advertência. O ácido fluorídrico é tóxico e altamente corrosivo para os olhos, pele e ossos. O Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate não se destina a ser utilizado como primeiro socorro em acidentes oculares com ácido fluorídrico, uma vez que não limita o efeito corrosivo do ácido fluorídrico.		

Efeitos secundários/defeitos

Os produtos foram concebidos como produtos de primeiros socorros para irrigação ocular. Caso se verifiquem efeitos secundários ou defeitos, comunique-os à Plum Safety ApS através do e-mail info@plum.eu ou através do telefone +45 6916 9600, para que possam ser tomadas as medidas de mitigação necessárias. Efeitos secundários graves devem ser sempre comunicados a uma autoridade competente relevante.

Contacto

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-mail: Info@plum.eu • Site: plum.eu