

Инструкция по использованию Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Список и названия продуктов

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Регистр. № 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Регистр. № 4801

Целевое назначение

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate — это средство первой помощи для промывания глаз и ран при контакте с кислотами и щелочами.


Инструкция по использованию — пиктограммы — Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

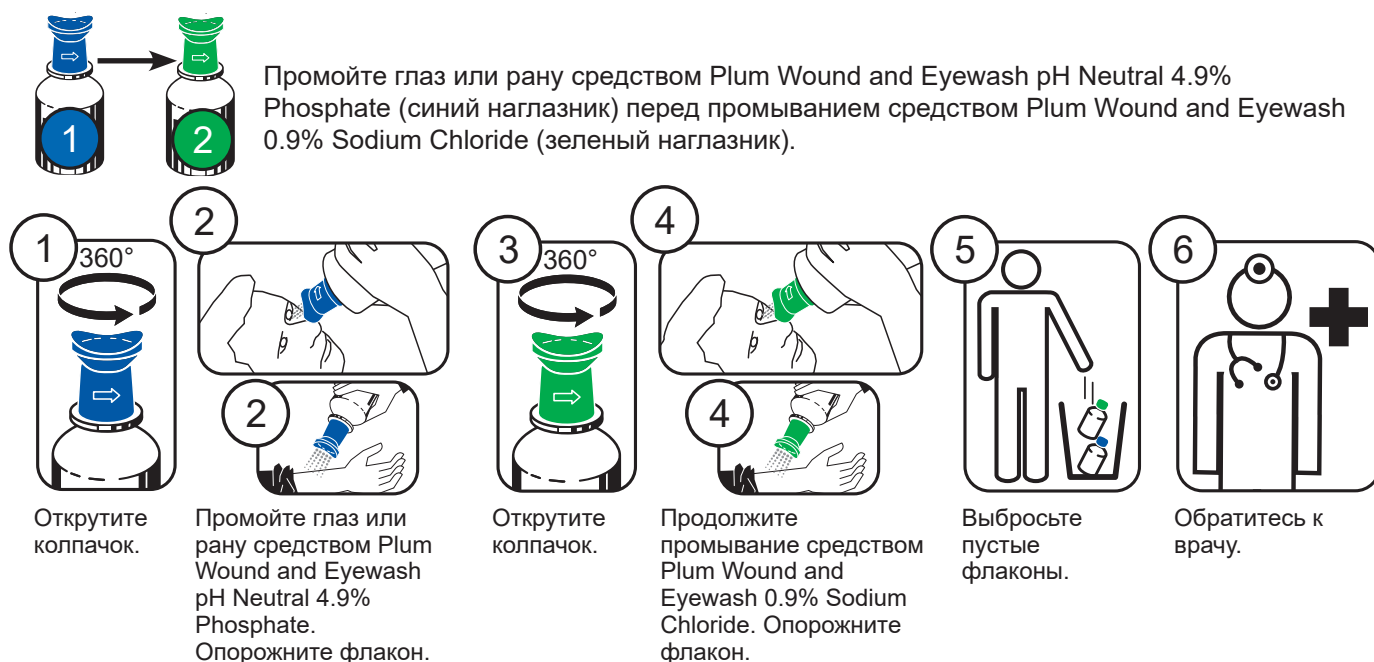

Промойте глаз или рану средством Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (синий наглазник) перед промыванием средством Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (зеленый наглазник).

- 1 360°
Открутите колпачок.
- 2
Промойте глаз или рану средством Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Опорожните флакон.
- 3 360°
Открутите колпачок.
- 4
Продолжите промывание средством Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Опорожните флакон.
- 5
Выбросьте пустые флаконы.
- 6
Обратитесь к врачу.

Инструкция по использованию — пиктограммы — Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

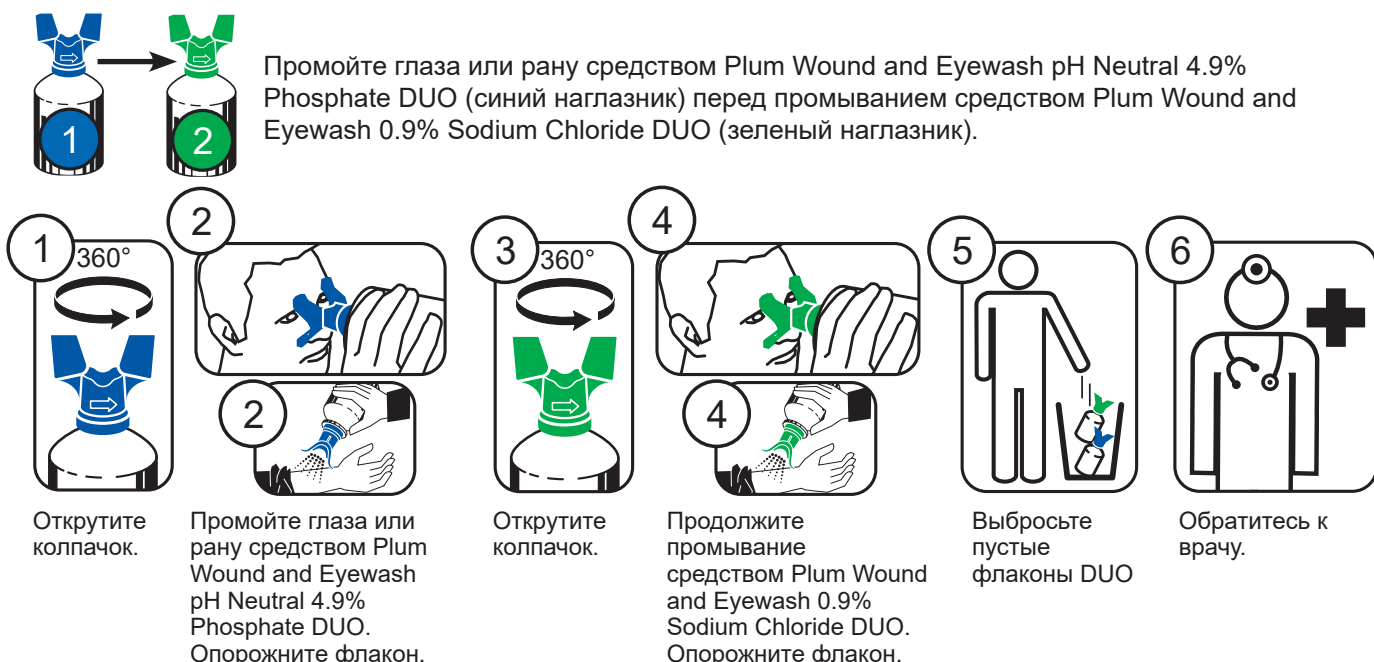

Промойте глаза или рану средством Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (синий наглазник) перед промыванием средством Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (зеленый наглазник).

- 1 360°
Открутите колпачок.
- 2
Промойте глаза или рану средством Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Опорожните флакон.
- 3 360°
Открутите колпачок.
- 4
Продолжите промывание средством Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Опорожните флакон.
- 5
Выбросьте пустые флаконы DUO.
- 6
Обратитесь к врачу.

Предупреждения



Не используйте это средство при попадании брызг, содержащих фтористоводородную кислоту.




Не используйте это средство при попадании брызг, содержащих кальций.



Не используйте это средство при попадании брызг, содержащих гипохлорит натрия (отбеливатели).

Пояснения к символам

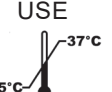	Более подробную информацию можно найти в буклете на обороте этикетки		Снимите/откройте внешний слой этикетки, чтобы прочитать буклет с более подробной информацией
	Указывает производителя медицинского изделия и приводится вместе с названием и адресом производителя		Указывает, как следует поворачивать флакон
	Маркировка CE с номером нотифицированного органа		Не использовать, если упаковка повреждена
	Единая стерильная барьерная система		Не использовать повторно. Медицинское изделие предназначено только для одноразового использования.
	Медицинское изделие		Сообщает код партии производителя для идентификации партии или серии.
	Предельная температура для использования		Срок годности. Указывает дату, после которой медицинское изделие не должно использоваться.
	Предельная температура для хранения		Дата изготовления
	Предупреждение! Вещества, содержащие кальций, такие как гидроксид кальция, цемент и известь, могут увеличить риск неблагоприятных последствий при повреждении роговицы, что может привести к кальцификации роговицы.		Предупреждение! Гипохлорит натрия может содержаться в чистящих средствах (отбеливателях). Хотя раздражающее действие щелочи уменьшается при использовании буфера, раздражающее действие хлора усиливается. Поэтому не рекомендуется использовать это средство в случае попадания таких брызг.
	Предупреждение! Фтористоводородная кислота токсична и сильно разъедает глаза, кожу и кости. Средство Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate не предназначено для оказания первой помощи при попадании в глаза фтористоводородной кислоты, поскольку оно не ограничивает коррозионное действие этой кислоты.		

Побочные эффекты / неисправности

Эти изделия разработаны в качестве средства первой помощи для промывания глаз. В случае возникновения побочных эффектов или неисправностей сообщите об этом в компанию Plum Safety ApS, написав на адрес электронной почты info@plum.eu или позвонив по телефону +45 6916 9600, чтобы были приняты необходимые меры по решению проблем. О серьезных побочных эффектах всегда следует сообщать в соответствующий компетентный орган.

Контактная информация

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Эл. почта: Info@plum.eu • Сайт: plum.eu