

Návod na použitie

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Zoznam a názvy výrobkov

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Určené použitie

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate je pomôcka na prvú pomoc, ktorá sa používa na výplach rán a očí pri úrazoch s kyselinami a zásadami.


Návod na použitie - piktogramy - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

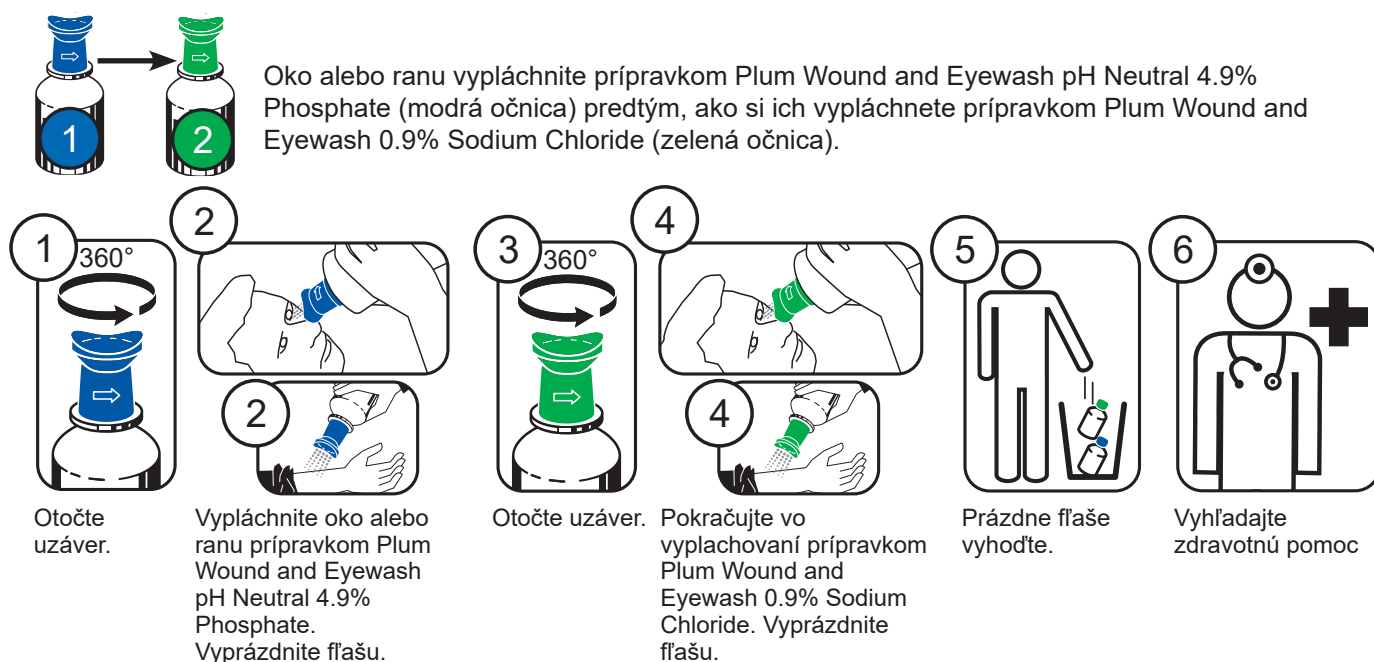

Oko alebo ranu vypláchnite prípravkom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (modrá očnica) predtým, ako si ich vypláchnete prípravkom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zelená očnica).

- 1 360° Otočte uzáver.
- 2 Vypláchnite oko alebo ranu prípravkom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Vyprázdnite fľašu.
- 3 360° Otočte uzáver.
- 4 Pokračujte vo vyplachovaní prípravkom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Vyprázdnite fľašu.
- 5 Prázdne fľaše vyhoďte.
- 6 Vyhľadajte zdravotnú pomoc.

Návod na použitie - piktogramy - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

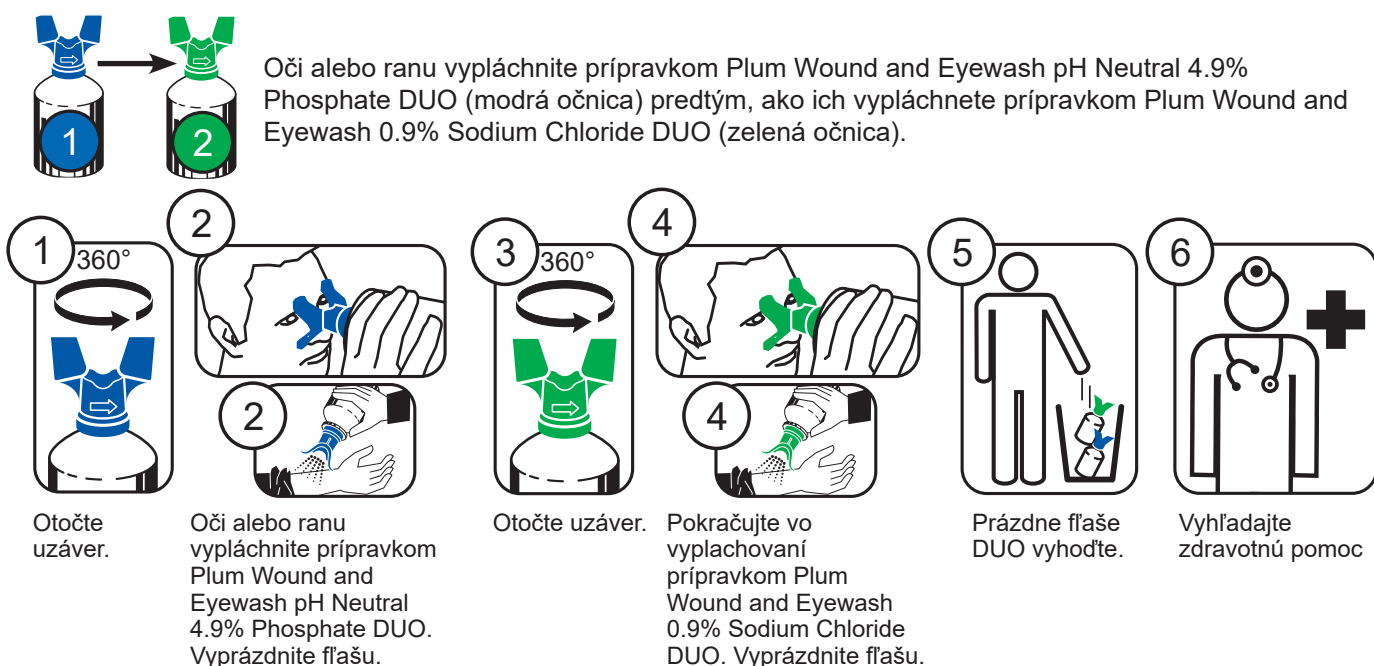

Oči alebo ranu vypláchnite prípravkom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (modrá očnica) predtým, ako ich vypláchnete prípravkom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (zelená očnica).

- 1 360° Otočte uzáver.
- 2 Oči alebo ranu vypláchnite prípravkom Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Vyprázdnite fľašu.
- 3 360° Otočte uzáver.
- 4 Pokračujte vo vyplachovaní prípravkom Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Vyprázdnite fľašu.
- 5 Prázdne fľaše DUO vyhoďte.
- 6 Vyhľadajte zdravotnú pomoc.

Varovanie



Nepoužívajte tento výrobok pri nehodách so spŕškami obsahujúcimi kyselinu fluorovodíkovú.



Nepoužívajte tento výrobok pri nehodách so spŕškami obsahujúcimi chlórnan sodný (bielidlá).



Nepoužívajte tento výrobok pri nehodách so spŕškami obsahujúcimi vápnik.

Vysvetlenie symbolov

	Ďalšie informácie nájdete v príbalovom letáčku na zadnej strane etikety		Odlepte/otvorte vonkajšiu vrstvu etikety a prečítajte si letáček s ďalšími informáciami
	Označuje výrobcu zdravotníckej pomôcky a uvádza sa spolu s názvom a adresou výrobcu		Pokyny, ako je potrebné fľašu otočiť
	Označenie CE s číslom notifikovaného orgánu		Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
	Systém jednej sterilnej bariéry		Nepoužívajte opakovane. Zdravotnícka pomôcka je určená len na jedno použitie.
	Zdravotnícka pomôcka		Informuje o kóde šarže výrobcu na identifikáciu šarže / dávky.
	Teplotný limit pre použitie		Dátum spotreby. Udáva dátum, po ktorom sa zdravotnícka pomôcka nesmie používať.
	Teplotný limit pre skladovanie		Dátum výroby
	Varovanie. Keď dôjde k poškodeniu rohovky, môžu látky obsahujúce vápnik, ako napríklad hydroxid vápenatý, cement a vápno, zvýšiť riziko nežiaducich účinkov, ktoré môžu viesť k jej kalcifikácii.		Varovanie. NaClO sa nachádza v čistiacich prostriedkoch (bielidlá). Hoci sa dráždivý účinok zásad použitím pufru zníži, dráždivý účinok chlóru sa zvýši. Preto sa neodporúča používať výrobok v prípade takýchto spŕšok.
	Varovanie. Kyselina fluorovodíková je toxická a vysokožieravá pre oči, pokožku a kosti. Očný výplach Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate nie je určený ako prvá pomoc pri očných nehodách zahŕňajúcich kyselinu fluorovodíkovú, pretože neobmedzuje žieravý účinok kyseliny fluorovodíkovej.		

Vedľajšie účinky / nesprávne fungovanie

Výrobky sú navrhnuté ako pomôcky na prvú pomoc, ktoré sa používajú na vyplavenie očí. V prípade výskytu vedľajších účinkov alebo nesprávneho fungovania nahláste túto udalosť spoločnosti Plum Safety ApS, na adresu info@plum.eu alebo telefonicky na číslo +45 6916 9600, aby sme mohli prijať nápravné opatrenia. Vážne vedľajšie účinky sa musia vždy oznámiť príslušnému, kompetentnému úradu.

Kontakt

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • Email: Info@plum.eu • Web: plum.eu