

Navodila za uporabo

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Seznam in imena izdelkov

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801

Predvideni namen

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate je izdelek za prvo pomoč pri izpiranju ran in oči po nesrečah s kislinami in alkalijami.


Navodila za uporabo – piktogrami – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

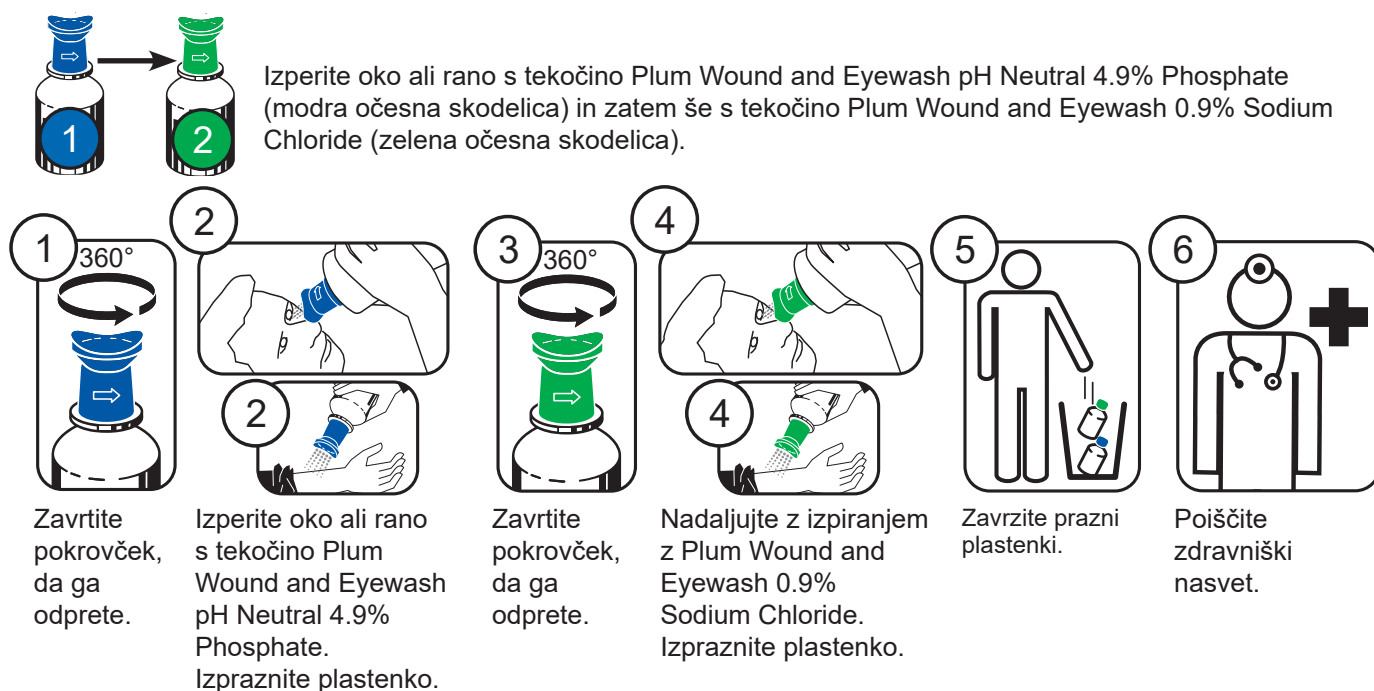

Izperite oko ali rano s tekočino Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (modra očesna skodelica) in zatem še s tekočino Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (zelena očesna skodelica).

- 1** 360°
Zavrtite pokrovček, da ga odprete.
- 2**
Izperite oko ali rano s tekočino Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Izpraznite plastenko.
- 3** 360°
Zavrtite pokrovček, da ga odprete.
- 4**
Nadaljujte z izpiranjem z Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Izpraznite plastenko.
- 5**
Zavrzite prazni plastenki.
- 6**
Poiščite zdravniški nasvet.

Navodila za uporabo – piktogrami – Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

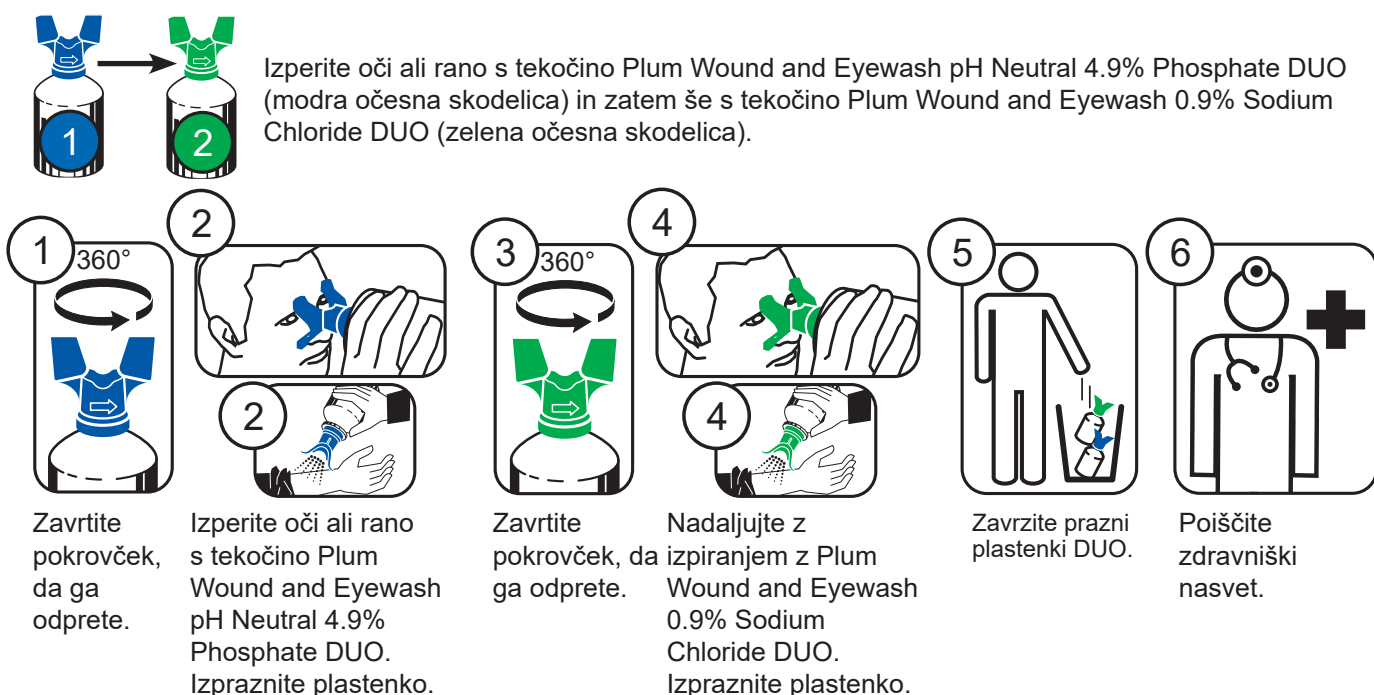

Izperite oči ali rano s tekočino Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (modra očesna skodelica) in zatem še s tekočino Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (zelena očesna skodelica).

- 1** 360°
Zavrtite pokrovček, da ga odprete.
- 2**
Izperite oči ali rano s tekočino Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Izpraznite plastenko.
- 3** 360°
Zavrtite pokrovček, da ga odprete.
- 4**
Nadaljujte z izpiranjem z Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Izpraznite plastenko.
- 5**
Zavrzite prazni plastenki DUO.
- 6**
Poiščite zdravniški nasvet.

Opozorila



Tega izdelka ne uporabljajte za incidente z brizganjem snovi, ki vsebujejo fluorovodikovo kislino.



Tega izdelka ne uporabljajte za incidente z brizganjem snovi, ki vsebujejo kalcij.



Tega izdelka ne uporabljajte za incidente z brizganjem snovi, ki vsebujejo natrijev hipoklorit (belilne snovi).

Razlaga simbolov

	Za podrobnejše informacije glejte knjižico na zadnji strani etikete		Odstranite/odprite zunanji sloj etikete, da preberete knjižico s podrobnejšimi informacijami
	Označuje proizvajalca medicinskega pripomočka in je prikazan skupaj z imenom in naslovom proizvajalca		Navaja, kako je treba plastenko obračati
	Oznaka CE s številko priglasenega organa		Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana
	Enojni sterilni pregradni sistem		Ne uporabljajte ponovno. Medicinski pripomoček je namenjen samo enkratni uporabi.
	Medicinski pripomoček		Obvešča o proizvajalčevi kodi serije za identifikacijo serije/lota.
	Temperaturna omejitev za uporabo		Rok uporabe. Označuje datum, po katerem medicinskega pripomočka ni več dovoljeno uporabljati.
	Temperaturna omejitev za shranjevanje		Datum proizvodnje
	Opozorilo. Snovi, ki vsebujejo kalcij, kot so: kalcijev hidroksid, cement in apno, lahko povečajo tveganje za neželene učinke, če pride do poškodbe roženice, kar lahko vodi do kalcifikacije roženice.		Opozorilo. NaClO lahko najdemo v čistilnih sredstvih (belila). Čeprav bo dražilni učinek alkalije zmanjšan z uporabo pufra, se bo dražilni učinek klora povečal. Zato ni priporočljivo uporabljati izdelka v primeru takšnih brizganj.
	Opozorilo. Fluorovodikova kislina je strupena in zelo jedka za oči, kožo in kosti. Izdelek Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate ni namenjen kot prva pomoč pri očesnih nesrečah, ki vključujejo fluorovodikovo kislino, ker ne omejuje jedkega učinka fluorovodika.		

Stranski učinki/okvare

Izdelki so zasnovani kot izdelek za prvo pomoč pri izpiranju oči. Če opazite neželene učinke ali okvare, vas prosimo, da o tem obvestite podjetje Plum Safety ApS prek info@plum.eu ali pokličete na telefonsko številko +45 6916 9600, da se lahko sprožijo potrebni popravni ukrepi. Resne škodljive učinke je treba vedno prijaviti ustreznemu in pristojnemu organu.

Stik

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • E-pošta: info@plum.eu • Spletna stran: plum.eu

Različica: 1.4 – Datum revizije: 11. 11. 2024 / sl 13.11.2024