

Kullanma talimatları

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride

Ürün listesi ve adları

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 200 ml	Ref. 4691
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 500 ml	Ref. 4604
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride, 1000 ml	Ref. 4707
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 500 ml	Ref. 4861
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO, 1000 ml	Ref. 4800
Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse, 20 ml	Ref. 5160

Kullanım amacı

Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride yaralarda ve gözlerde kir, toz sıvı ve yabancı cisimlerin durulanması ve yıkanması için kullanılan steril ilk yardım ürünüdür.

Kullanma talimatları - resimli diyagramlar - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride



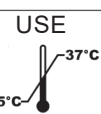
Kullanma talimatları - resimli diyagramlar - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO



Kullanma talimatları - resimli diyagramlar - Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride QuickRinse



Sembollerin açıklaması

	Tıbbi cihaz üreticisini gösterir, üreticinin adı ve adresi ile birlikte gösterilir		Şişenin nasıl döndürülmesi gerektiğini açıklar
	Onaylı kuruluş numarası ile birlikte CE işareti		Paket hasarlı ise kullanmayın
	Tekli steril bariyer sistemi		Tekrar kullanmayın. Tıbbi cihaz tek seferlik kullanım içindir.
	Tıbbi cihaz		Parti / lot tanımlama amacıyla üreticinin parti kodunu bildirir.
	Kullanım için sıcaklık sınırı		Son kullanma tarihi. Tıbbi cihaz belirtilen tarihten sonra kullanılmamalıdır.
	Saklama için sıcaklık sınırı		Üretim tarihi
	Daha fazla bilgi etiketin arkasındaki kitapçıkta mevcuttur		Daha fazla bilgi içeren kitapçığı okumak için, etiketin diğer katmanını soyun / açın

Yan etkileri / bozulma

Ürünler gözlerin tahriş olması durumunda kullanılan ilk yardım ürünüdür. Yan etkiler veya bozulmalar yaşanırsa, bunları lütfen Plum Safety ApS, info@plum.eu veya +45 6916 9600 numaralı telefondan bildirin, böylelikle gerekli çözüm önlemleri başlatılabilir. Ciddi yan etkiler daima ilgili yetkili kurumlara bildirilmelidir.

İletişim

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-posta: info@plum.eu • Web sitesi: plum.eu