

Kullanma talimatları

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Ürün listesi ve adları

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Ref. 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Ref. 4801


Kullanım amacı

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate asitler ve alkali kazalarını içeren durumlarda yaraların ve gözlerin yıkanması için kullanılan ilk yardım ürünüdür.

Kullanma talimatları - resimli diyagramlar - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

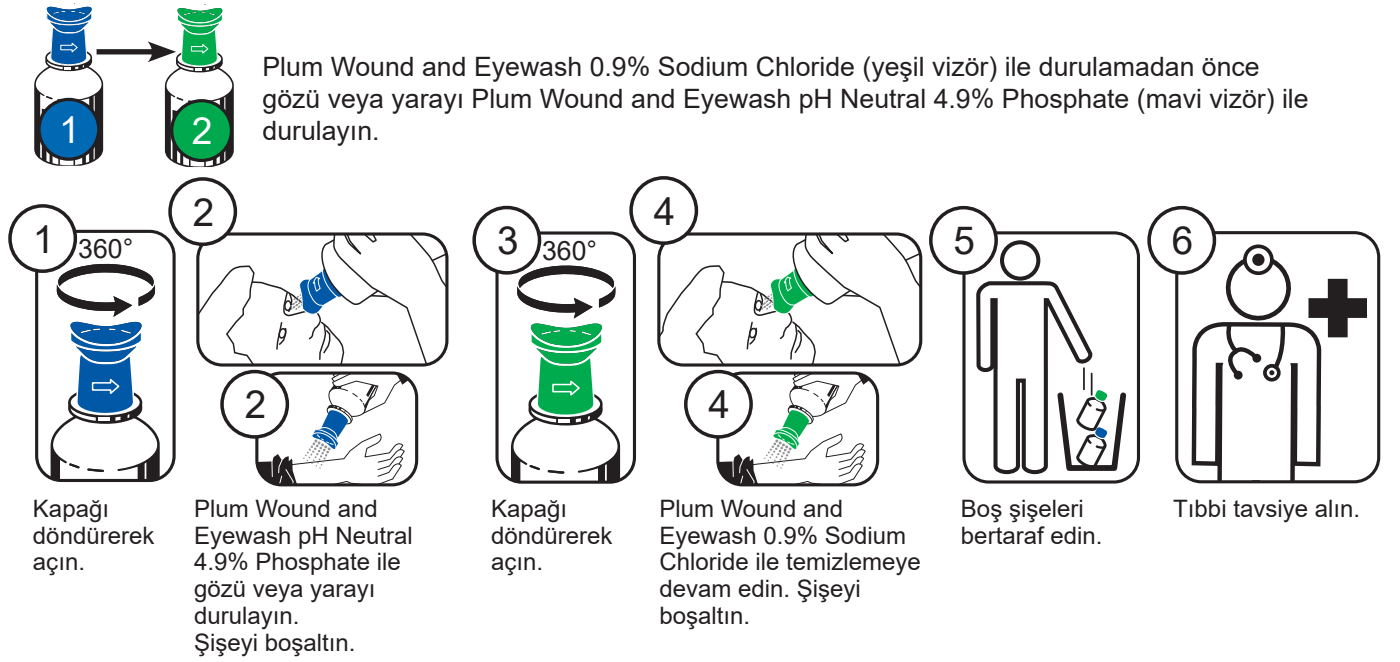

Kullanma talimatları - resimli diyagramlar - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

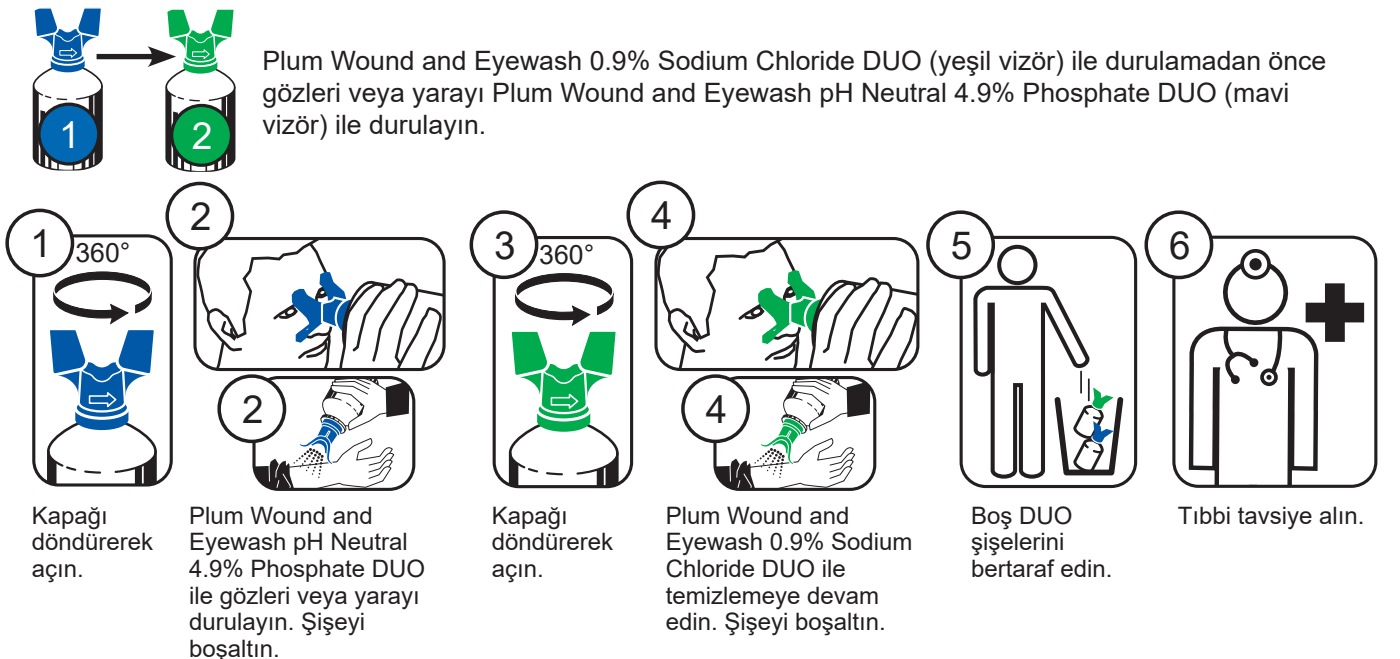

Uyarılar



HF

Bu ürünü hidroflorik asit içeren maddelerin sıçramasından kaynaklanan olaylarda kullanmayın.



Ca

Bu ürünü kalsiyum içeren maddelerin sıçramasından kaynaklanan olaylarda kullanmayın.



NaClO

Bu ürünü sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içeren maddelerin sıçramasından kaynaklanan olaylarda kullanmayın.

Sembollerin açıklaması

	Daha fazla bilgi etiketin arkasındaki kitapçıkta mevcuttur		Daha fazla bilgi içeren kitapçığı okumak için, etiket dış katmanını soyun / açın
	Tıbbi cihaz üreticisini gösterir, üreticinin adı ve adresi ile birlikte gösterilir		Şişenin nasıl döndürülmesi gerektiğini açıklar
	Onaylı kuruluş numarası ile birlikte CE işareti		Paket hasarlı ise kullanmayın
	Tekli steril bariyer sistemi		Tekrar kullanmayın. Tıbbi cihaz tek seferlik kullanım içindir.
	Tıbbi cihaz		Parti / lot tanımlama amacıyla üreticinin parti kodunu bildirir.
	Kullanım için sıcaklık sınırı		Son kullanma tarihi. Tıbbi cihaz belirtilen tarihten sonra kullanılmamalıdır.
	Saklama için sıcaklık sınırı		Üretim tarihi
	Uyarı. Kornea hasarı oluştuysa, kalsiyum hidroksit, çimento ve kireç gibi kalsiyum içeren maddeler yan etki riskini artırabilir, bu da kornea kalsifikasyonuna yol açabilir.		Uyarı. NaClO temizlik ürünlerinde (çamaşır suları) bulunabilir. Tampon kullanımı sebebiyle alkalinin tahriş edici etkisi azalacak olsa da klorinin tahriş edici etkisi artacaktır. Bu yüzden, bu tür sıçramalarda ürünün kullanılması tavsiye edilmez.
	Uyarı. Hidroflorik asit zehirlidir ve gözleri, cildi ve kemikler için yüksek derecede aşındırıcıdır. Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, hidroflorik asidin aşındırıcı etkisini sınırlamadığından hidroflorik asitten kaynaklanan göz kazalarında ilk yardım amacıyla kullanılmamalıdır.		

Yan etkileri / bozulma

Ürünler gözlerin tahriş olması durumunda kullanılan ilk yardım ürünüdür. Yan etkiler veya bozulmalar yaşanırsa, bunları lütfen Plum Safety ApS, info@plum.eu veya +45 6916 9600 numaralı telefonda bildirir, böylelikle gerekli çözüm önlemleri başlatılabilir. Ciddi yan etkiler daima ilgili yetkili kurumlara bildirilmelidir.

İletişim

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens • +45 6916 9600 • E-posta: info@plum.eu • Web sitesi: plum.eu