

Інструкція з використання Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate


Список і назви продуктів

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate, 200 ml	Реєстрац. № 4752
Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO, 500 ml	Реєстрац. № 4801


Цільове призначення

Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate — це засіб першої допомоги для промивання ран і очей після контакту з кислотами та лугами.

Інструкція з використання — піктограми — Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate

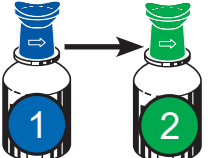


Промийте око або рану засобом Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate (синій ковпачок для промивання) перед промиванням за допомогою Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride (зелений ковпачок для промивання).

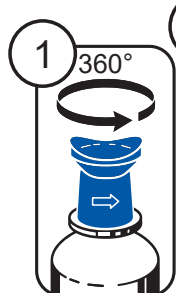


1 360°

Відкрутіть ковпачок.

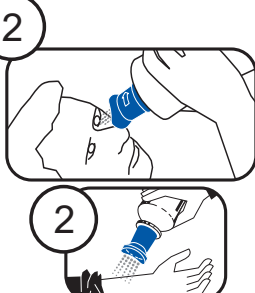


2

Промийте око або рану засобом Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate. Спорожніть пляшку.

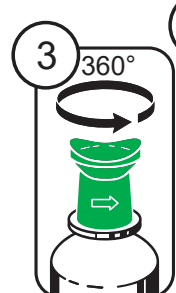

3 360°

Відкрутіть ковпачок.

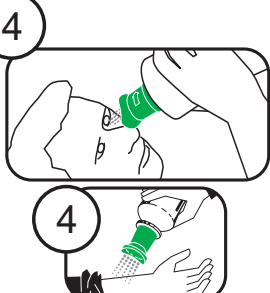


4

Продовжуйте промивати око або рану засобом Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride. Спорожніть пляшку.



5


Викиньте порожні пляшки.

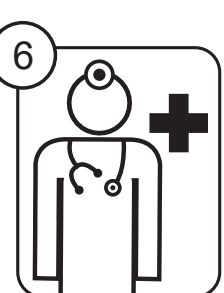


6

Зверніться до лікаря.

Instruction for use - pictograms - Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO

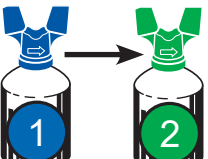


Промийте очі або рану засобом Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO (синій ковпачок для промивання) перед промиванням за допомогою Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO (зелений ковпачок для промивання).

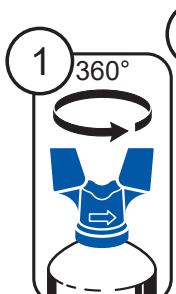


1 360°

Відкрутіть ковпачок.

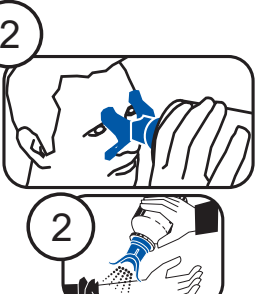


2

Промийте очі або рану засобом Plum Wound and Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate DUO. Спорожніть пляшку.

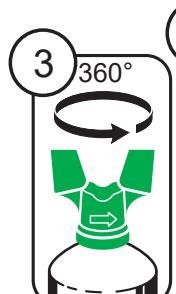


3 360°

Відкрутіть ковпачок.

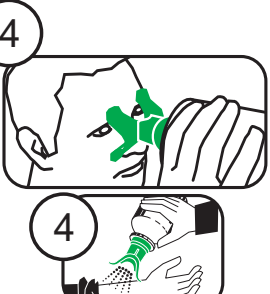


4

Продовжуйте промивати очі або рану засобом Plum Wound and Eyewash 0.9% Sodium Chloride DUO. Спорожніть пляшку.

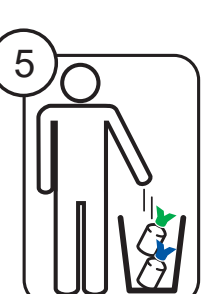

5

Викиньте порожні пляшки DUO.

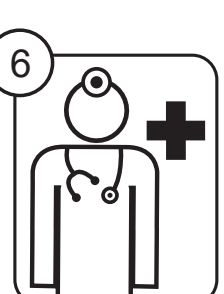

6

Зверніться до лікаря.

Попередження



Не використовуйте цей засіб у разі потрапляння на уражену ділянку бризок, що містять фтористоводневу кислоту.



Не використовуйте цей засіб у разі потрапляння на уражену ділянку бризок, що містять кальцій.



Не використовуйте цей засіб у разі потрапляння на уражену ділянку бризок, що містять гіпохлорит натрію (відбілювачі).

Пояснення до символів

	Докладнішу інформацію можна знайти в буклеті на звороті етикетки		Зніміть / відкрийте верхній шар етикетки, щоб прочитати буклет із докладнішою інформацією
	Указує виробника медичного виробу та наводиться разом із назвою й адресою виробника		Указує, як слід повертати пляшку
	Маркування CE з номером нотифікованого органу		Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена
	Єдина стерильна бар'єрна система		Не використовувати повторно. Медичний виріб призначений тільки для одноразового використання.
	Медичний виріб		Повідомляє код партії виробника для ідентифікації партії або серії.
	Гранична температура для використання		Термін придатності. Указує дату, після якої медичний виріб не повинен використовуватися.
	Гранична температура для зберігання		Дата виготовлення
	Попередження. Речовини, що містять кальцій, як-от гідроксид кальцію, цемент і вапно, можуть збільшити ризик несприятливих наслідків у разі пошкодження рогівки, що може призвести до кальцифікації рогівки.		Попередження. Гіпохлорит натрію може міститися в мийних засобах (відбілювачах). Хоча подразнювальна дія лугу зменшується в разі використання буфера, подразнювальна дія хлору посилюється. Тому не рекомендується використовувати цей засіб у разі потрапляння таких бризок на тіло або в очі.
	Попередження. Фтористоводнева кислота токсична й сильно роз'їдає очі, шкіру та кістки. Засіб Plum Eyewash pH Neutral 4.9% Phosphate не призначений для надання першої допомоги в разі потрапляння в очі фтористоводневої кислоти, оскільки він не обмежує корозійну дію цієї кислоти.		

Побічні ефекти та неналежна дія

Ці вироби розроблені як засіб першої допомоги для промивання очей. Якщо виникли побічні ефекти або виявлено неналежну дію, просимо повідомити про це компанію Plum Safety ApS за електронною адресою info@plum.eu або за телефоном +45 6916 9600, щоб ми могли вжити необхідних заходів для усунення недоліків. Про серйозні побічні ефекти завжди слід повідомляти відповідний компетентний орган.

Контактні дані

Plum Safety ApS • Mandelalleen 1 • DK-5610 Assens •
+45 6916 9600 • Ел. пошта: Info@plum.eu • Вебсайт: plum.eu

Версія: 1.4 — Дата оновлення: 11.11.2024 / uk 13.11.2024